



QAP-Hematología

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QAP-H - Hematología

LABORATORIO CLÍNICO COLMÉDICOS IPS SAS. BOGOTÁ SEDE CASTELLANA

Correo electrónico: ingrid.bahamon@colmedicos.com.co
Dirección: Bogotá - Carrera 19A No 76-34
Ciudad: Bogotá Distrito Capital
País: Colombia
Contacto: Ingrid Bahamón
Teléfono: 3154337453

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100178

Código de reporte: QAP-H-100178-46-1
Ronda: 46
Muestra: 1
Código de la muestra: DS1224
Tipo de muestra: Líquido- Eritrocitos humanos estabilizados
Fecha generación: 20 / febrero / 2025



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-H - Hematología

Identificación Laboratorio:	100178
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-13
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos. Los detalles de preparación y manejo del control se encuentran en el inserto de cada programa.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. Los valores asignados de la sección 3 se obtienen de laboratorios clínicos con metodologías o materiales de referencia trazables al "Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine" (JCTLM).

Diseño de los programas QAP:

Los programas QAP LC están compuestos por rondas de acuerdo con la frecuencia establecida para cada programa. Las matrices utilizadas con conmutables con las muestras de las pacientes procesadas en la cotidianidad del laboratorio. El valor asignado se obtiene a partir de una comparación interlaboratorios a nivel internacional, el consenso QAP y/o un laboratorio con material o metodología de referencia trazable al JCTLM.

Para el análisis estadístico de los datos se realizan los siguientes cálculos:

Formula Desviación Estandar:

$$Desviación\ estándar = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Formula Media:

$$Media = \frac{\sum \text{todos los datos}}{\text{Número de datos}}$$

Formula Zscore:

$$Z - score = \frac{\text{Resultado reportado por el laboratorio} - \bar{x} \text{ de consenso}}{D.E. \text{ del grupo consenso}}$$

Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} \pm D.E * k$$

 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología		Identificación Laboratorio:	100178
			Ronda:	46
			Muestra:	1
			Código Muestra:	DS1224
			Fecha reporte:	2025-02-13
			Estado:	Evaluación original

2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

1 IT	2 NOT	3 Mensurando	4 Analizador	5 Método	6 VRL	7 U-LAB	8 M-C	9 U-MC	10 DE-C	11 T-C	12 Zs	13 VAL	14 COMP
1		Ancho de distribución del eritrocito	Sysmex XP-300	Calculado	17.6	%	18,23	%	1,27	Acumulada	-0,5	Satisfactorio	Método
2		Concentración de hemoglobina corpuscular media	Sysmex XP-300	Calculado	36.1	g/dL	32,94	g/dL	2,47	Mensual	1,28	Satisfactorio	Método
3		Hematocrito	Sysmex XP-300	Calculado	16.3	%	17,75	%	0,84	Acumulada	-1,72	Satisfactorio	Método
4		Hemoglobina	Sysmex XP-300	Photometric	5.9	g/dL	5,93	g/dL	0,17	Consenso	-0,18	Satisfactorio	Todos los laboratorios
5		Hemoglobina corpuscular media	Sysmex XP-300	Calculado	28.7	pg/cell	25,89	pg/cell	0,87	Acumulada	3,24	No satisfactorio	Método
6		Recuento de glóbulos blancos	Sysmex XP-300	Electrical impedance	3.5	K/uL	3,04	K/uL	0,2	Acumulada	2,28	Alarma	Método
7		Recuento de glóbulos rojos	Sysmex XP-300	Electrical impedance	2.05	M/uL	2,3	M/uL	0,09	Acumulada	-2,84	Alarma	Método
8		Recuento de plaquetas	Sysmex XP-300	Electrical impedance	39	K/uL	41,44	K/uL	3,41	Consenso	-0,72	Satisfactorio	Todos los laboratorios
9		Volumen corpuscular medio	Sysmex XP-300	Electrical impedance	79.4	fL	78,86	fL	4,16	Acumulada	0,13	Satisfactorio	Método
10		Volumen plaquetario medio	Sysmex XP-300	Electrical impedance	11.3	fL	10,71	fL	0,81	Acumulada	0,73	Satisfactorio	Método

IT: Ítem		NOT: Notificaciones		VRL: Valor reportado por el laboratorio		U-LAB: Unidades de laboratorio		U-MC: Unidades Originales de la media de comparación			
M-C: Media del grupo de comparación		DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación		T-C: Tipo de consenso		Zs: Z-score		VAL: Valoración		COMP: Comparador	

Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	 Tardío	☒ Ausente	 Revalorado
---	--	--	---	--	---

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología	Identificación	100178
		Laboratorio:	
		Ronda:	46
		Muestra:	1
		Código Muestra:	DS1224
		Fecha reporte:	2025-02-13
		Estado:	Evaluación original

3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Mensurando	VRL	U-LAB	X _{pt}	U-X _{pt}	M-REF	D%	ETmp/APS	Límites aceptación Bajo Alto	Valoración

VRL: Valor reportado por el laboratorio				U-X_{pt}: Unidades del valor aceptado como verdadero			
U-LAB: Unidades de laboratorio		M-REF: Método de referencia		D% Diferencia porcentual %			

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X _{pt}		No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X _{pt}		ETmp%/APS Error Total máximo permisible * Fuente VB MIN.EFLM.2024		X _{pt} Valor aceptado como verdadero	
---	--	--	--	---	--	--	--



Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología

Identificación Laboratorio:	100178
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-13
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Ancho de distribución del eritrocito

17.6 %



Sysmex XP-300

Calculado VB MIN.
EFLM.2
024

3.8% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	18,23	1,27	509	15,69 a 20,77	-3,46	-0,5	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	17,86	1,08	35	15,69 a 20,02	-1,44	-0,24	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	17,77	0,98	33	15,81 a 19,74	-0,97	-0,17	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

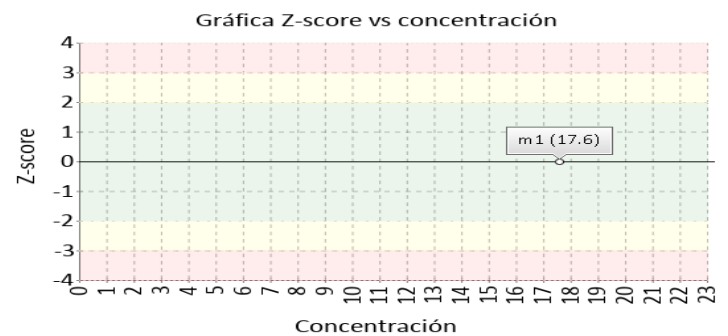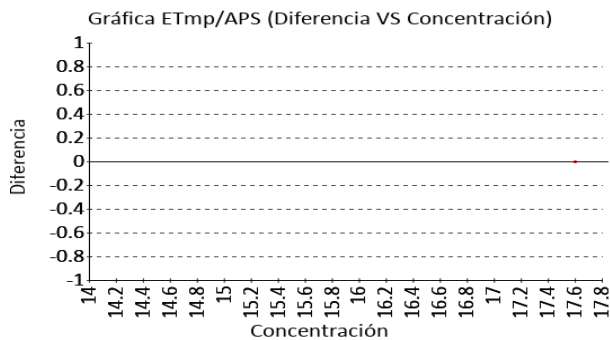

Concentración de hemoglobina corpuscular media

36.1 g/dL



Sysmex XP-300

Calculado VB MIN.
EFLM.2
024

1.9% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	32,94	2,47	507	28 a 37,88	9,59	1,28	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	32,29	2,15	49	27,99 a 36,58	11,8	1,77	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	32,28	2,16	47	27,95 a 36,6	11,85	1,77	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

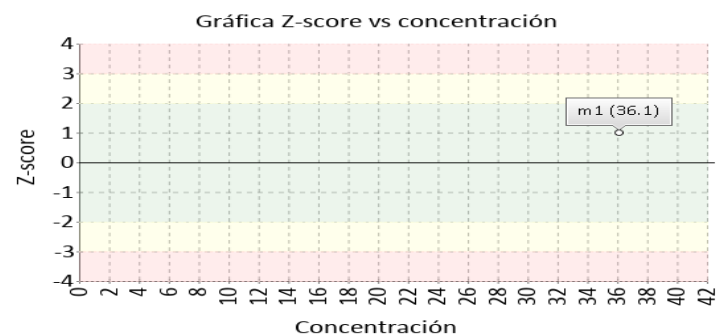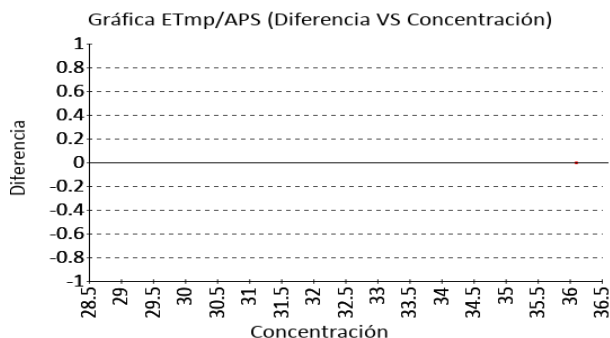



Quality Assurance Program **PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO** **QAP-H - Hematología**

Identificación Laboratorio:	100178
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-13
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Hematocrito

16.3 %

Sysmex XP-300



Calculado

CLIA
2022

4% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	17,75	0,84	661	16,06 a 19,44	-8,17	-1,72	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	18,19	1,05	49	16,08 a 20,29	-10,39	-1,8	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	18,24	1,04	45	16,15 a 20,32	-10,61	-1,86	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

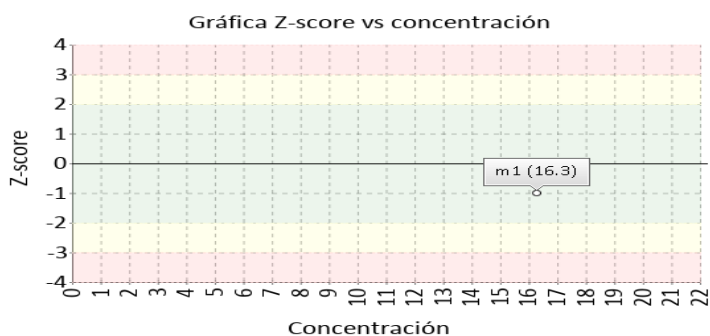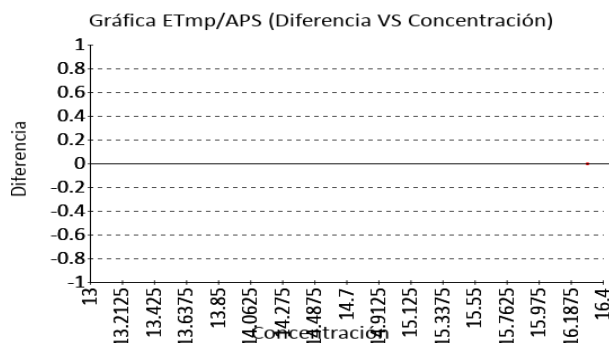

Hemoglobina

5.9 g/dL

Sysmex XP-300



Photometric

CLIA
2022

4% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	5,93	0,17	46	5,59 a 6,27	-0,51	-0,18	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología2	5,92	0,16	19	5,6 a 6,25	-0,42	-0,15	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

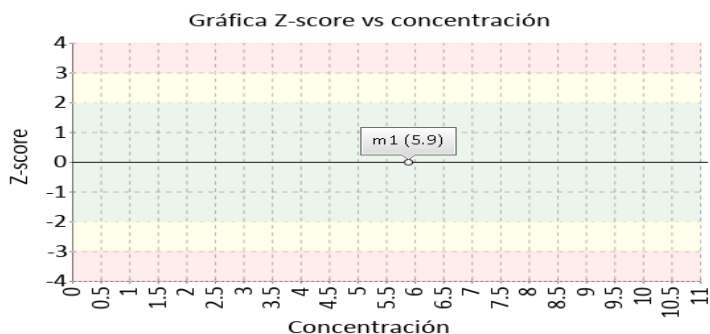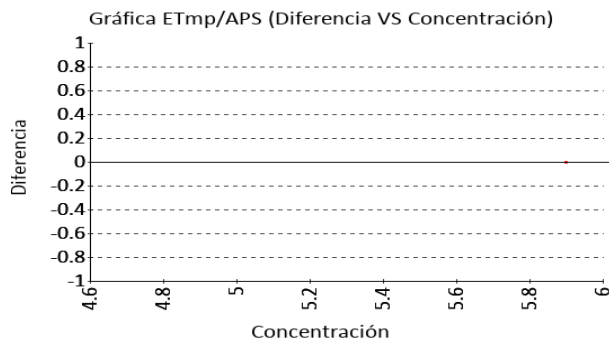



Quality Assurance Program **PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO** **QAP-H - Hematología**



Identificación Laboratorio:	100178
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-13
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Hemoglobina corpuscular media	28.7 pg/cell	Sysmex XP-300	Calculado VB MIN. EFLM.2 024	2.6% APS
--------------------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	----------

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	25,89	0,87	902	24,16 a 27,62	10,85	3,24	No satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	25,32	0,89	44	23,55 a 27,09	13,34	3,81	No satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	25,32	0,9	43	23,53 a 27,11	13,35	3,77	No satisfactorio



(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

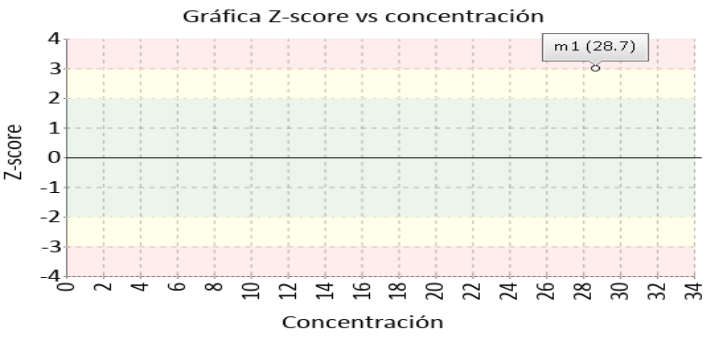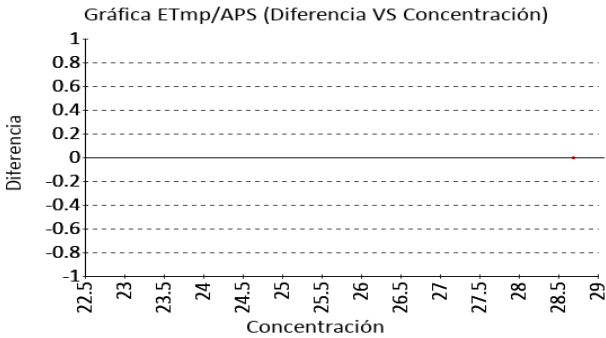

Recuento de glóbulos blancos	3.5 K/uL	Sysmex XP-300	Electrical impedance	CLIA 2022	10% APS
-------------------------------------	-----------------	---------------	----------------------	-----------	---------

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	3,04	0,2	503	2,64 a 3,44	15,13	2,28	Alarma
Todos los participantes de QAP3	3,07	0,23	42	2,61 a 3,52	14,15	1,89	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	3,07	0,24	37	2,58 a 3,55	14,09	1,78	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

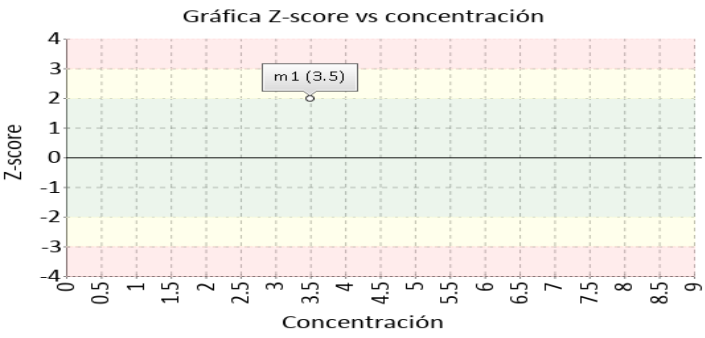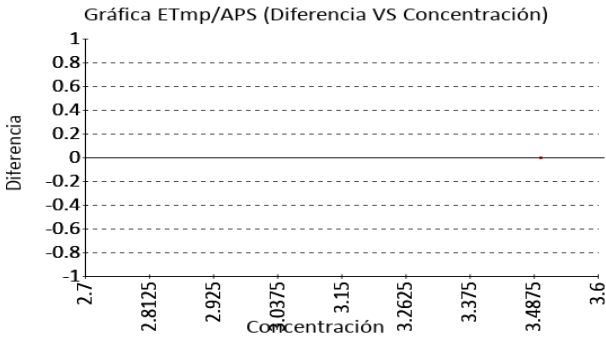



Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología

Identificación Laboratorio:	100178
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-13
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Recuento de glóbulos rojos

2.05 M/uL

Sysmex XP-300



Electrical impedance

 CLIA
2022

4% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	2,3	0,09	790	2,12 a 2,48	-10,87	-2,84	Alarma
Todos los participantes de QAP3	2,31	0,09	50	2,13 a 2,49	-11,4	-2,94	Alarma
Participantes QAP misma metodología1	2,33	0,08	45	2,17 a 2,49	-11,93	-3,43	No satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

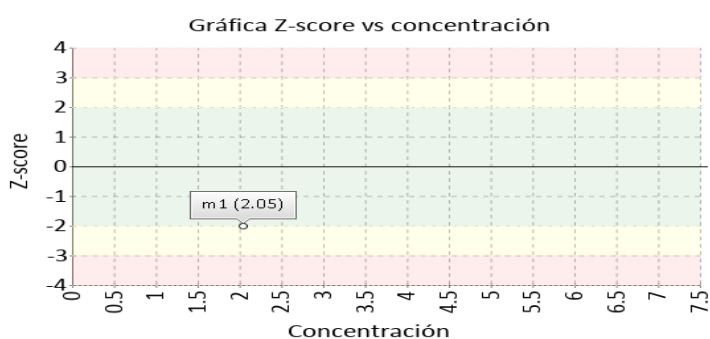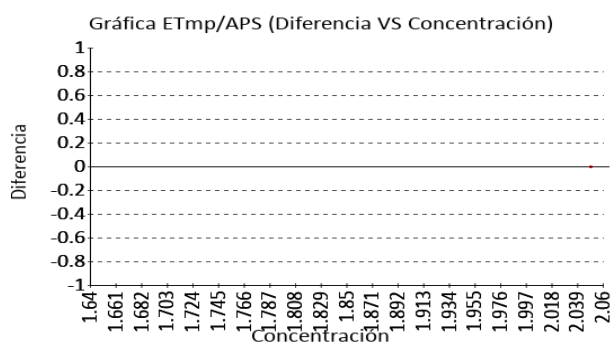

Recuento de plaquetas

39 K/uL

Sysmex XP-300



Electrical impedance

 CLIA
2022

25% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	41,44	3,41	47	34.62 a 48.26	-5,89	-0,72	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología2	41,53	2,7	41	36.12 a 46.94	-6,09	-0,94	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

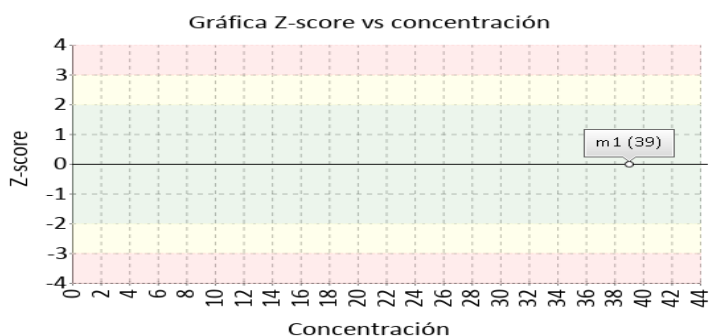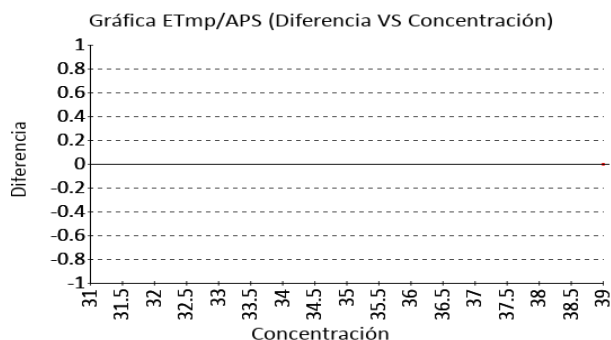



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-H - Hematología



Identificación Laboratorio:	100178
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-13
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Volumen corpuscular medio	79.4 fL	Sysmex XP-300	Electrical impedance	VB MIN. EFLM.2 024	2.5% APS
----------------------------------	----------------	---------------	----------------------	--------------------------	----------

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	78,86	4,16	787	70,54 a 87,18	0,68	0,13	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	79	2,6	42	73.81 a 84.19	0,51	0,15	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	79,43	2,31	29	74.81 a 84.06	-0,04	-0,01	Satisfactorio



(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

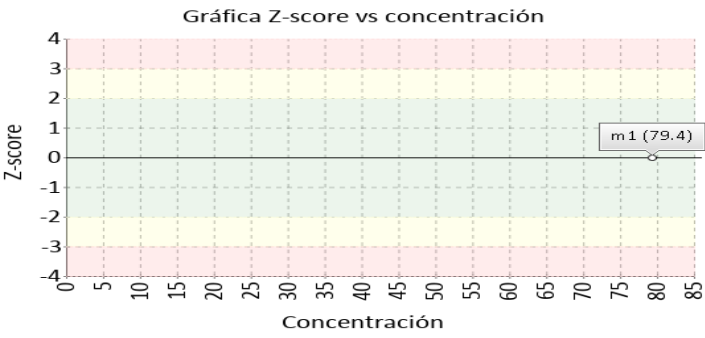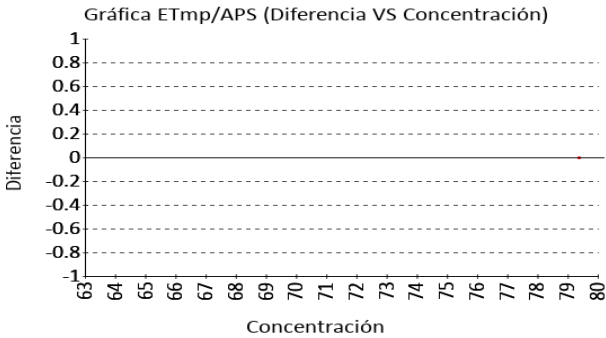

Volumen plaquetario medio	11.3 fL	Sysmex XP-300	Electrical impedance	VB MIN. EFLM.2 024	5.6% APS
----------------------------------	----------------	---------------	----------------------	--------------------------	----------

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	10,71	0,81	492	9,08 a 12,34	5,51	0,73	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	11,17	0,35	35	10.46 a 11.88	1,16	0,37	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	11,24	0,37	19	10.51 a 11.97	0,53	0,16	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

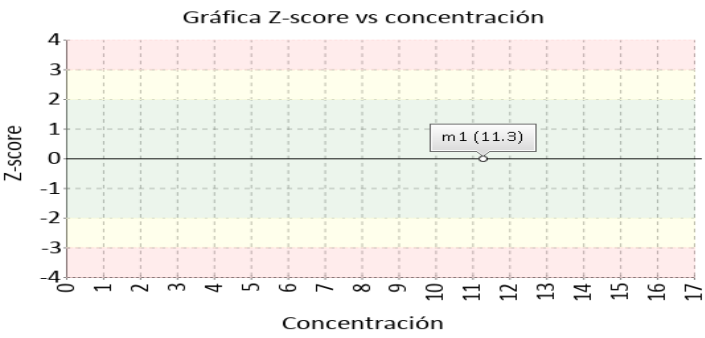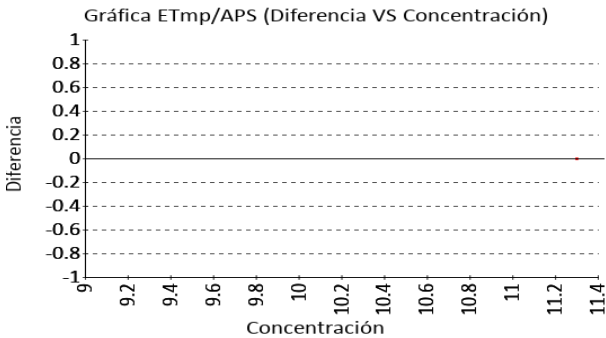

 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología	Identificación	100178
		Laboratorio:	
		Ronda:	46
		Muestra:	1
		Código Muestra:	DS1224
		Fecha reporte:	2025-02-13
		Estado:	Evaluación original

5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Ancho de distribución del eritrocito	Sysmex XP-300	Calculado		No declarado		No trazable
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	Sysmex XP-300	Calculado		No declarado		No trazable
3	Hematocrito	Sysmex XP-300	Calculado		No declarado		No trazable
4	Hemoglobina	Sysmex XP-300	Photometric	110 38	No declarado	130	Trazable por metodología
5	Hemoglobina corpuscular media	Sysmex XP-300	Calculado		No declarado		No trazable
6	Recuento de glóbulos blancos	Sysmex XP-300	Electrical impedance		No declarado		No trazable
7	Recuento de glóbulos rojos	Sysmex XP-300	Electrical impedance	111	No declarado	131	No trazable
8	Recuento de plaquetas	Sysmex XP-300	Electrical impedance	112	No declarado	132	No trazable
9	Volumen corpuscular medio	Sysmex XP-300	Electrical impedance		No declarado		No trazable
10	Volumen plaquetario medio	Sysmex XP-300	Electrical impedance		No declarado		No trazable

Nomenclatura método

110: Spectrophotometry **38:** Spectroscopy after reaction with KCN **111:** Flow cytometry, cell differentiation by impedance or light scattering, coincidence correction by dilution series JCTLM DB identifier C16RMP1 **112:** Flow cytometry cell differentiation by fluorescence detection of antibody stained platelets and light scattering coincidence correction by dilution series JCTLM DB identifier C3RMMP35

Nomenclatura materiales

130: Lyophilized fresh or frozen whole blood **131:** Fresh or stabilized whole blood **132:** Fresh whole blood

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología	Identificación	100178
		Laboratorio:	
		Ronda:	46
		Muestra:	1
		Código Muestra:	DS1224
		Fecha reporte:	2025-02-13
		Estado:	Evaluación original

6. RESUMEN DE RONDA



Ítem	Mensurando	Muestra 1		
		Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP
1	Ancho de distribución del eritrocito	N/A	-0,5	-0,24
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	N/A	1,28	1,77
3	Hematocrito	N/A	-1,72	-1,8
4	Hemoglobina	N/A	N/A	-0,18
5	Hemoglobina corpuscular media	N/A	3,24	3,81
6	Recuento de glóbulos blancos	N/A	2,28	1,89
7	Recuento de glóbulos rojos	N/A	-2,84	-2,94
8	Recuento de plaquetas	N/A	N/A	-0,72
9	Volumen corpuscular medio	N/A	0,13	0,15
10	Volumen plaquetario medio	N/A	0,73	0,37
Notificaciones		 0  0  0		

X_{pt} - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	X_{pt} - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	N/A No aplica	 Tardío	☒ Ausente	 Revalorado
---	---	---	--	--	---------------	--	---	--

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología	Identificación Laboratorio:	100178
		Ronda:	46
		Muestra:	1
		Código Muestra:	DS1224
		Fecha reporte:	2025-02-13
		Estado:	Evaluación original

7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

7.1. DESEMPEÑO PARA LA MUESTRA 1

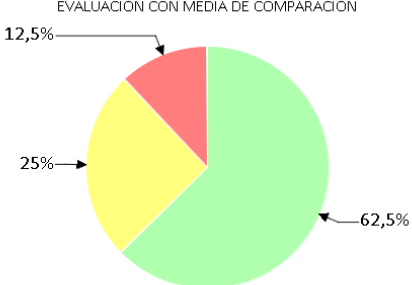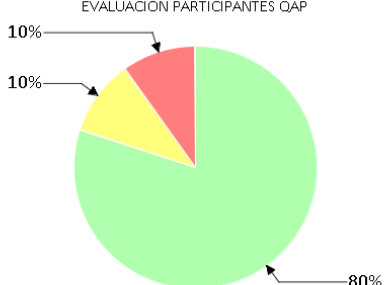EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN 			EVALUACIÓN CON RL-MMT-JCTLM.		EVALUACIÓN PARTICIPANTES QAP 		
Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio	Satisfactorio	No satisfactorio	Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
5	2	1	0	0	8	1	1
62,5%	25%	12,5%	0%	0%	80%	10%	10%

Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

Maria Paula Mora

Aprobado por:
Coordinador QAP
Programas QAP

Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Contacto: 3174399931
Correo: maria.mora@quik.com.co