



"Quality Assurance Program"

Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica



**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD**
QAP-H - Hematología

**LABORATORIO CLÍNICO COLMÉDICOS IPS SAS. BOGOTÁ
SEDE CASTELLANA**

Correo electrónico: ingrid.bahamon@colmedicos.com.co
Dirección: Bogotá - Carrera 19A No 76-34
Ciudad: Bogotá Distrito Capital
País: Colombia
Contacto: Ingrid Bahamón
Teléfono: 3154337453

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100178

Código de reporte: QAP-H-100178-30-4
Ronda: 30
Muestra: 4
Código de la muestra: PL0797
Tipo de muestra: Líquido- Eritrocitos humanos estabilizados
Fecha generación: 26 / noviembre / 2021

Identificación Laboratorio:	100178
Ronda:	30
Muestra:	4
Código Muestra:	PL0797
Fecha reporte:	2021-11-25
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS como organización certificada ISO 27001:2013 ¹, y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ², garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de la seguridad de la información y en cumplimiento con el numeral.
- (2) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. y para los programas de patología anatómica con la fundación Santa Fé de Bogotá

Identificación Laboratorio:	100178
Ronda:	30
Muestra:	4
Código Muestra:	PL0797
Fecha reporte:	2021-11-25
Estado:	Evaluación original

2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IT	NOT	Mensurando	Analizador	Método	VRL	U-LAB	M-C	U-MC	DE-C	T-C	Zs	VAL	COMP
1	☒	Ancho de distribución del eritrocito	Sysmex XP-300	Calculado	11.2	%	12,7	%	2,25	Consenso	-0,67	Satisfactorio	Todos los laboratorios
2	☒	Concentración de hemoglobina corpuscular media	Sysmex XP-300	Calculado	35.6	g/dL	34,27	g/dL	1,35	Consenso	0,99	Satisfactorio	Todos los laboratorios
3	☒	Hematocrito	Sysmex XP-300	Calculado	46.5	%	46,79	%	2,31	Consenso	-0,13	Satisfactorio	Todos los laboratorios
4	☒	Hemoglobina	Sysmex XP-300	Photometric	16.1	g/dL	15,97	g/dL	0,33	Consenso	0,39	Satisfactorio	Todos los laboratorios
5	☒	Hemoglobina corpuscular media	Sysmex XP-300	Calculado	31.5	pg/cell	31,07	pg/cell	0,75	Consenso	0,57	Satisfactorio	Todos los laboratorios
6	☒	Recuento de glóbulos blancos	Sysmex XP-300	Electrical impedance	20.1	K/uL	20,27	K/uL	1,13	Consenso	-0,15	Satisfactorio	Todos los laboratorios
7	☒	Recuento de glóbulos rojos	Sysmex XP-300	Electrical impedance	4.77	M/uL	5,09	M/uL	0,12	Consenso	-2,67	Alarma	Todos los laboratorios
8	☒	Recuento de plaquetas	Sysmex XP-300	Electrical impedance	515	K/uL	492,89	K/uL	34,47	Consenso	0,64	Satisfactorio	Todos los laboratorios
9	☒	Volumen corpuscular medio	Sysmex XP-300	Electrical impedance	89	fL	90,99	fL	4,05	Consenso	-0,49	Satisfactorio	Todos los laboratorios
10	☒	Volumen plaquetario medio	Sysmex XP-300	Electrical impedance	9.0	fL	7,69	fL	0,82	Consenso	1,6	Satisfactorio	Todos los laboratorios

IT: Item	NOT: Notificaciones	VRL: Valor reportado por el laboratorio	U-LAB: Unidades de laboratorio	U-MC: Unidades Originales de la media de comparación
M-C: Media del grupo de comparación	DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación	T-C: Tipo de consenso	Zs: Z-score	VAL: Valoración
COMP: Comparador				

<p align="center">Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.</p>	<p align="center">Alarma si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.</p>	<p align="center">No satisfactorio si su resultado es mayor a 3 Z-score.</p>	☒	☒	✎
			Tardío	Ausente	Revalorado



"Quality Assurance Program"
Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-H - Hematología

Identificación Laboratorio:	100178
Ronda:	30
Muestra:	4
Código Muestra:	PL0797
Fecha reporte:	2021-11-25
Estado:	Evaluación original

3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Mensurando	VRL	U-LAB	V.A.V.	U-V.A.V.	M-REF	D%	ETmp%	Límites aceptación Bajo Alto	Valoración

VRL: Valor reportado por el laboratorio				U-V.A.V.: Unidades del valor aceptado como verdadero						
U-LAB: Unidades de laboratorio			M-REF: Método de referencia			D% Diferencia porcentual %				

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V	No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V	ETmp Error Total máximo permisible * Fuente CAP	V.A.V. Valor aceptado como verdadero
--	---	---	---

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Ancho de distribución del eritrocito

11.2 %


Calculado

3% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	12,7	2,25	26	8,2 a 17,2	-11,81	-0,67	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	12,7	2,25	26	8,19 a 17,2	-11,78	-0,66	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

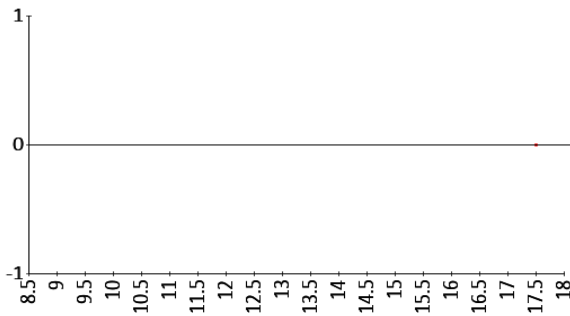

Gráfica Z-score vs concentración

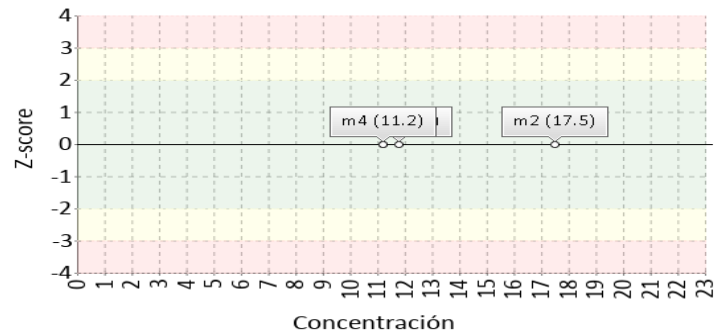

Concentración de hemoglobina corpuscular media

35.6 g/dL

Calculado

3% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	34,27	1,35	27	31,57 a 36,97	3,88	0,99	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	34,27	1,35	27	31,56 a 36,97	3,89	0,99	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración

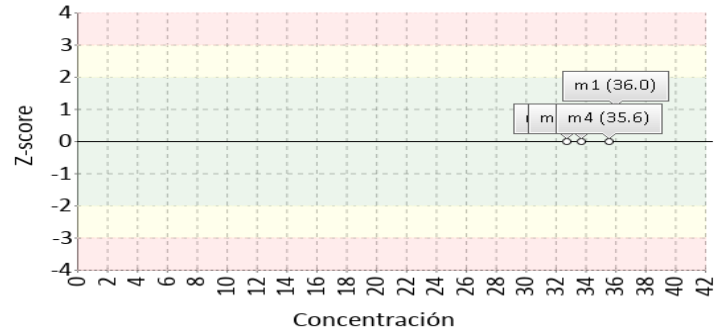

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Hematocrito

46.5 %


Calculado

6% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	46,79	2,31	27	42,17 a 51,41	-0,62	-0,13	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	46,79	2,31	27	42,16 a 51,41	-0,61	-0,12	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

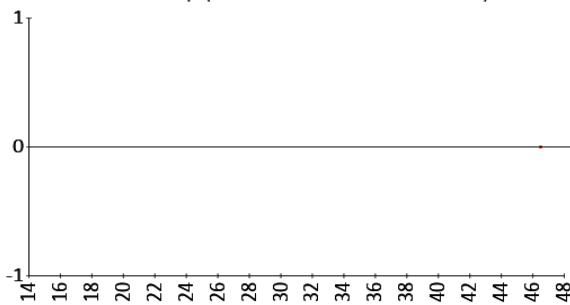

Gráfica Z-score vs concentración

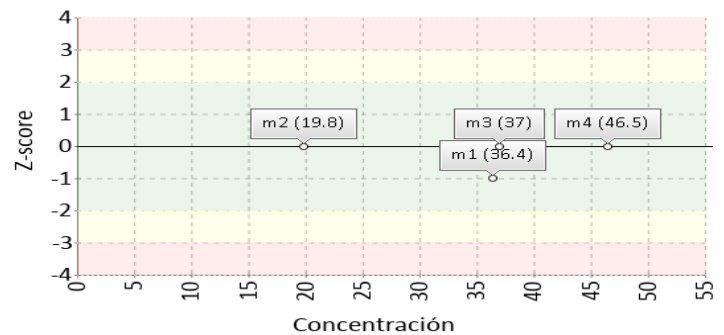

Hemoglobina

16.1 g/dL


Photometric

4% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	15,97	0,33	27	15,31 a 16,63	0,81	0,39	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	16,03	0,37	19	15,29 a 16,76	0,46	0,2	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

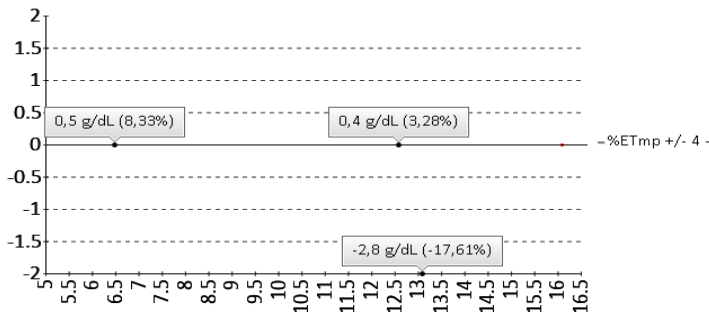

Gráfica Z-score vs concentración

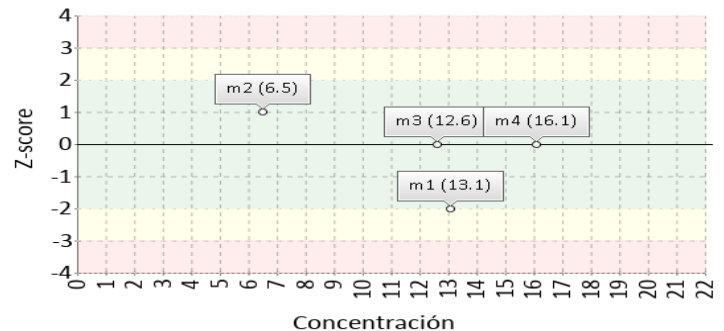

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Hemoglobina corpuscular media

31.5 pg/cell


Calculado

3% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	31,07	0,75	26	29,57 a 32,57	1,38	0,57	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	31,07	0,75	26	29,58 a 32,57	1,38	0,57	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

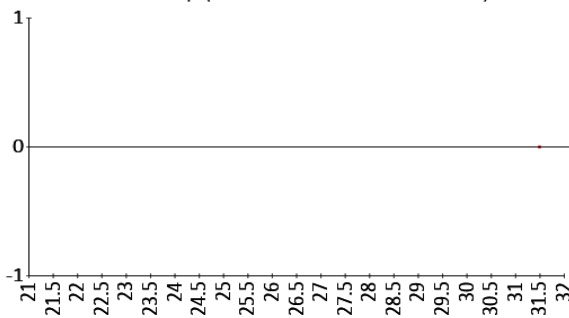

Gráfica Z-score vs concentración

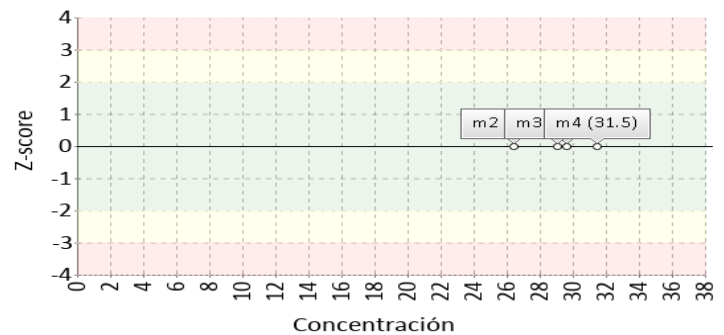

Recuento de glóbulos blancos

20.1 K/uL


Electrical impedance

15% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	20,27	1,13	26	18,01 a 22,53	-0,84	-0,15	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	20,06	0,88	24	18,3 a 21,82	0,21	0,05	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

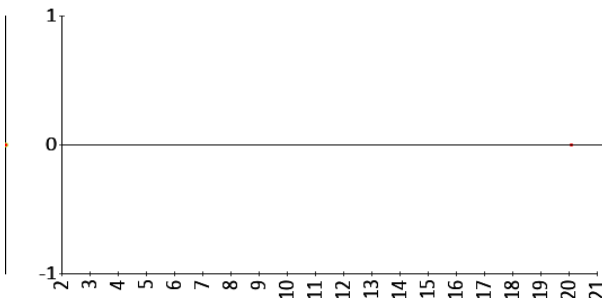

Gráfica Z-score vs concentración

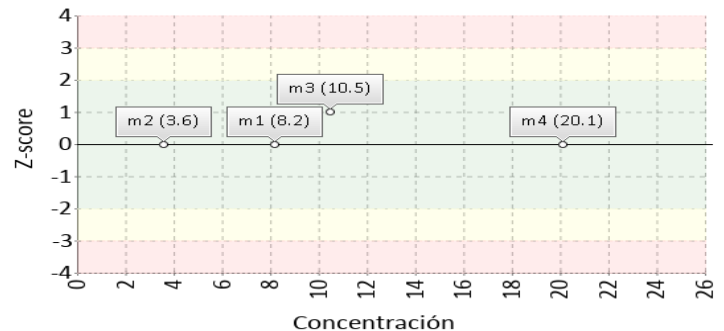

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Recuento de glóbulos rojos

4.77 M/uL


Electrical impedance

6% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	5,09	0,12	26	4,85 a 5,33	-6,29	-2,67	Alarma
Participantes QAP misma metodología	5,1	0,12	25	4,86 a 5,33	-6,44	-2,81	Alarma

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

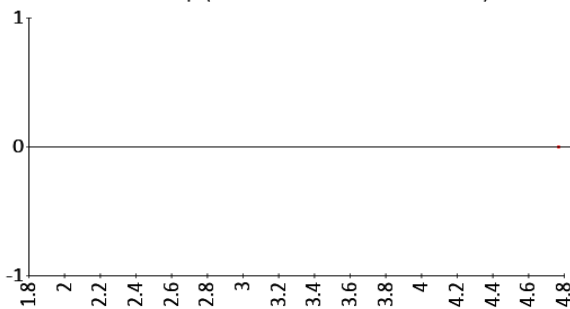

Gráfica Z-score vs concentración

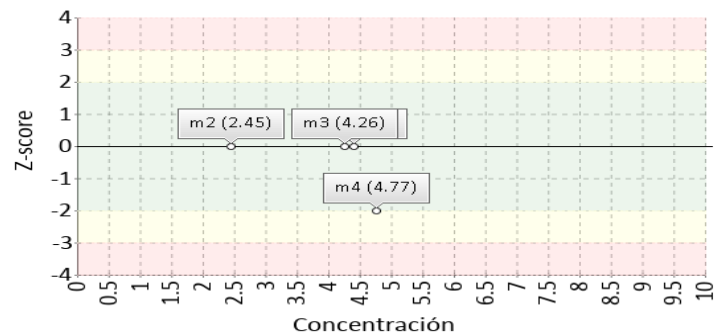

Recuento de plaquetas

515 K/uL


Electrical impedance

25% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	492,89	34,47	27	423,95 a 561,83	4,49	0,64	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	492,92	35,16	26	422,61 a 563,24	4,48	0,63	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

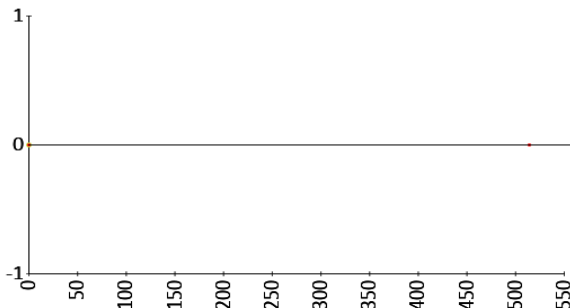

Gráfica Z-score vs concentración

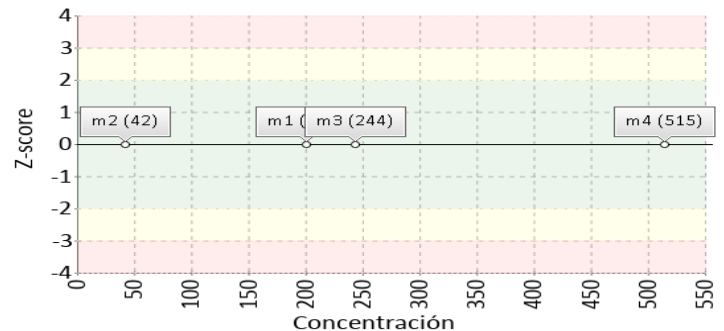

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Volumen corpuscular medio

89 fL


Electrical impedance

3% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	90,99	4,05	27	82,89 a 99,09	-2,19	-0,49	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	90,86	3,81	19	83,24 a 98,47	-2,04	-0,49	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

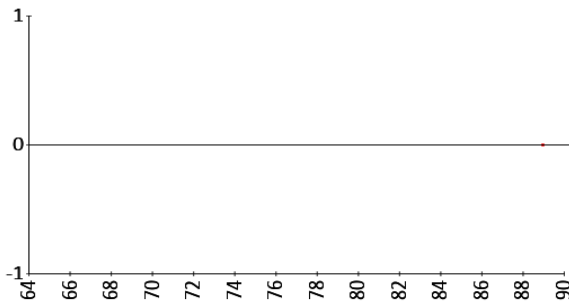

Gráfica Z-score vs concentración

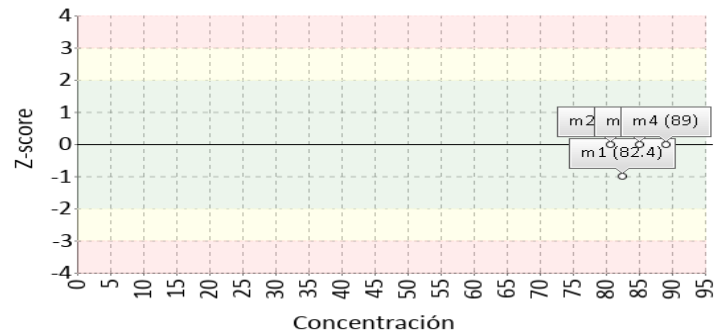

Volumen plaquetario medio

9.0 fL


Electrical impedance

3% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	7,69	0,82	27	6,05 a 9,33	17,04	1,6	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	7,84	0,84	19	6,16 a 9,53	14,77	1,37	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

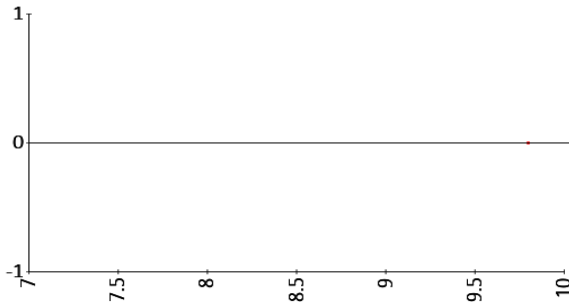

Gráfica Z-score vs concentración

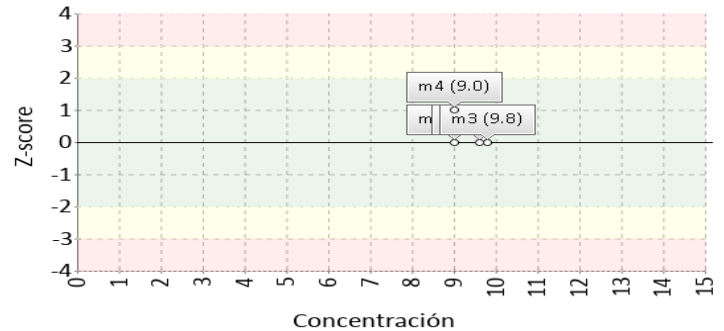

5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Ancho de distribución del eritrocito	Sysmex XP-300	Calculado		No declarado		No trazable
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	Sysmex XP-300	Calculado		No declarado		No trazable
3	Hematocrito	Sysmex XP-300	Calculado		No declarado		No trazable
4	Hemoglobina	Sysmex XP-300	Photometric	38	No declarado		No trazable
5	Hemoglobina corpuscular media	Sysmex XP-300	Calculado		No declarado		No trazable
6	Recuento de glóbulos blancos	Sysmex XP-300	Electrical impedance		No declarado		No trazable
7	Recuento de glóbulos rojos	Sysmex XP-300	Electrical impedance		No declarado		No trazable
8	Recuento de plaquetas	Sysmex XP-300	Electrical impedance		No declarado		No trazable
9	Volumen corpuscular medio	Sysmex XP-300	Electrical impedance		No declarado		No trazable
10	Volumen plaquetario medio	Sysmex XP-300	Electrical impedance		No declarado		No trazable

Nomenclatura método
38: Spectroscopy after reaction with KCN

Nomenclatura materiales

6. RESUMEN DE RONDA


Ítem	Mensurando	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Muestra 4		
		DIF% con RL- MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP	DIF% con RL- MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP	DIF% con RL- MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP	DIF% con RL- MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP
1	Ancho de distribución del eritrocito	N/A	N/A	-0,88	N/A	N/A	-0,03	N/A	N/A	-0,68	N/A	N/A	-0,67
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	N/A	1,91	0,98	N/A	N/A	-0,36	N/A	N/A	0,09	N/A	N/A	0,99
3	Hematocrito	N/A	-1,47	-0,98	N/A	0,97	1,11	N/A	0,54	0,32	N/A	N/A	-0,13
4	Hemoglobina	-17,61	-2,14	0,23	8,33	N/A	1,44	3,28	N/A	0,56	N/A	N/A	0,39
5	Hemoglobina corpuscular media	N/A	0,51	-0,07	N/A	N/A	0,19	N/A	0,66	0,16	N/A	N/A	0,57
6	Recuento de glóbulos blancos	N/A	-0,12	-0,28	N/A	-0,43	-0,06	N/A	1,56	0,13	N/A	N/A	-0,15
7	Recuento de glóbulos rojos	N/A	-0,6	-0,37	N/A	0,77	1,4	N/A	0,42	0,05	N/A	N/A	-2,67
8	Recuento de plaquetas	N/A	-0,67	-0,85	N/A	0,58	0	N/A	0,41	0,72	N/A	N/A	0,64
9	Volumen corpuscular medio	N/A	-1,59	-0,87	N/A	0,87	0,55	N/A	-0,2	-0,28	N/A	N/A	-0,49
10	Volumen plaquetario medio	N/A	0,15	0,56	N/A	N/A	0,89	N/A	0,55	0,62	N/A	N/A	1,6
Notificaciones		10 0 0			10 0 0			10 0 0			10 0 0		

V.A.V - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	V.A.V. - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a 3 Z-score.	N/A No aplica	 Tardío	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	 Revalorado
--	---	---	--	--	----------------------	---	---	---

Identificación Laboratorio:	100178
Ronda:	30
Muestra:	4
Código Muestra:	PL0797
Fecha reporte:	2021-11-25
Estado:	Evaluación original

7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 4 MUESTRAS

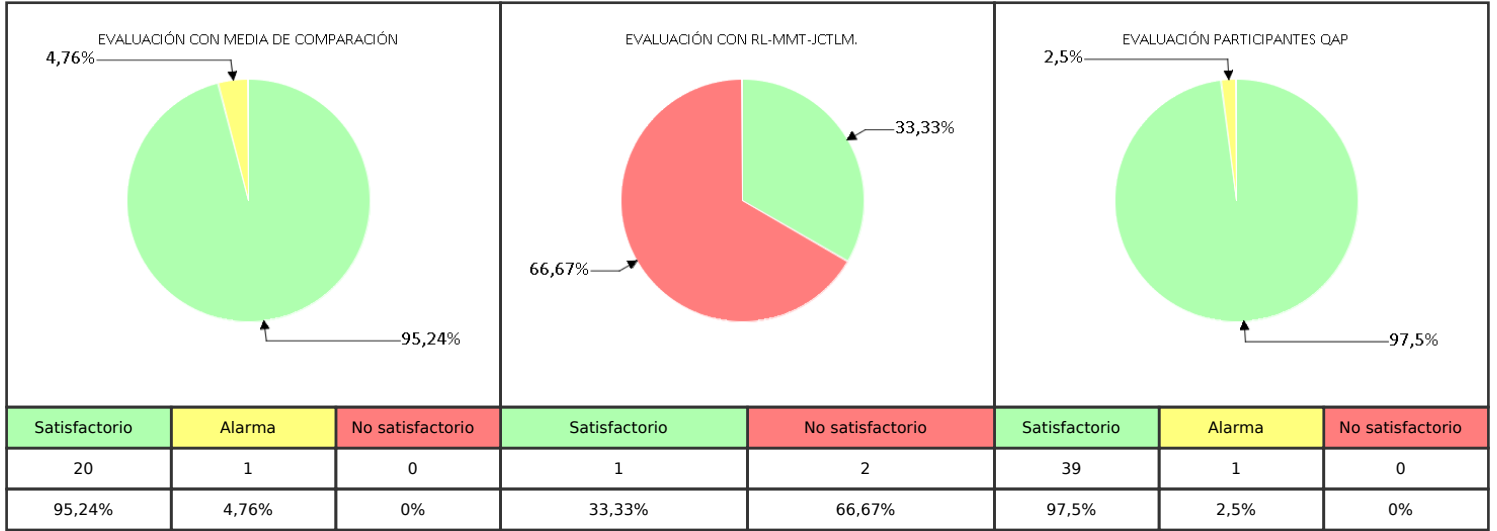

Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

Aprobado por
Aída Porras. MSc. PhD
Coordinadora programas QAP