



## QAP-Química Clínica

### PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QAP-Q - Química sanguínea

#### LABORATORIO CLÍNICO COLMÉDICOS IPS SAS. CALI SEDE SANTA MÓNICA

Correo electrónico:  
coordinacionlaboratorio.cali@colmedicos.com  
Dirección: CALLE 26 N 6N-55, SANTA MONICA RESIDENCIAL  
Ciudad: Cali Valle del Cauca  
País: Colombia  
Contacto: Mary Andreina Rosario  
Teléfono: 311 893 5940

#### IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100209

Código de reporte: QAP-Q-100209-55-5  
Ronda: 55  
Muestra: 5  
Código de la muestra: CF2606  
Tipo de muestra: Liofilizado -Suero humano  
Fecha generación: 17 / febrero / 2025



**Quality Assurance Program**  
**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO**  
**QAP-Q - Química sanguínea**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100209              |
| Ronda:                      | 55                  |
| Muestra:                    | 5                   |
| Código Muestra:             | CF2606              |
| Fecha reporte:              | 2025-02-07          |
| Estado:                     | Evaluación original |

### 1. TÉRMINOS GENERALES

#### Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 <sup>1</sup>, ISO 14001:2015 <sup>2</sup>, ISO 45001:2018 <sup>3</sup> y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 <sup>4</sup>, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

#### Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos. Los detalles de preparación y manejo del control se encuentran en el inserto de cada programa.

#### Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. Los valores asignados de la sección 3 se obtienen de laboratorios clínicos con metodologías o materiales de referencia trazables al "Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine" (JCTLM).

#### Diseño de los programas QAP:

Los programas QAP LC están compuestos por rondas de acuerdo con la frecuencia establecida para cada programa. Las matrices utilizadas con conmutables con las muestras de las pacientes procesadas en la cotidianidad del laboratorio. El valor asignado se obtiene a partir de una comparación interlaboratorios a nivel internacional, el consenso QAP y/o un laboratorio con material o metodología de referencia trazable al JCTLM.

**Para el análisis estadístico de los datos se realizan los siguientes cálculos:**

#### Formula Desviación Estandar:

$$Desviación\ estándar = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

#### Formula Media:

$$Media = \frac{\sum \text{todos los datos}}{\text{Número de datos}}$$

#### Formula Zscore:

$$Z - score = \frac{\text{Resultado reportado por el laboratorio} - \bar{x} \text{ de consenso}}{D.E. \text{ del grupo consenso}}$$

#### Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} \pm D.E * k$$

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------|
| <br>"Quality Assurance Program"<br>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica | <b>Quality Assurance Program</b><br><b>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</b><br><b>QAP-Q - Química sanguínea</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identificación Laboratorio: | 100209              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ronda:                      | 55                  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Muestra:                    | 5                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Muestra:             | CF2606              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha reporte:              | 2025-02-07          |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado:                     | Evaluación original |

## 2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

| 1<br>IT | 2<br>NOT | 3<br>Mensurando  | 4<br>Analizador  | 5<br>Método                               | 6<br>VRL | 7<br>U-LAB | 8<br>M-C | 9<br>U-MC | 10<br>DE-C | 11<br>T-C | 12<br>Zs | 13<br>VAL     | 14<br>COMP |
|---------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|------------|
| 1       |          | ALT (ALAT/GPT)   | Roche Cobas c111 | UV without P5P                            | 90.20    | U/L        | 99,32    | U/L       | 7,56       | Acumulada | -1,21    | Satisfactorio | Método     |
| 2       |          | AST (ASAT/GOT)   | Roche Cobas c111 | UV without P5P                            | 187.25   | U/L        | 204,8    | U/L       | 19,49      | Acumulada | -0,9     | Satisfactorio | Método     |
| 3       |          | Colesterol HDL   | Roche Cobas c111 | Direct Enzymatic Colorimetric             | 21.43    | mg/dL      | 25,69    | mg/dL     | 3,07       | Acumulada | -1,39    | Satisfactorio | Método     |
| 4       |          | Colesterol Total | Roche Cobas c111 | Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase | 88.33    | mg/dL      | 92,95    | mg/dL     | 4,94       | Mensual   | -0,94    | Satisfactorio | Método     |
| 5       |          | Creatinina       | Roche Cobas c111 | Enzymatic IFCC-IDMS Standardized          | 5.03     | mg/dL      | 5,38     | mg/dL     | 0,14       | Acumulada | -2,54    | Alarma        | Método     |
| 6       |          | Glucosa          | Roche Cobas c111 | Hexokinase                                | 285.24   | mg/dL      | 289,2    | mg/dL     | 6,22       | Acumulada | -0,64    | Satisfactorio | Par        |
| 7       |          | Nitrógeno Uréico | Roche Cobas c111 | Urease, UV                                | 44.33    | mg/dL      | 44,46    | mg/dL     | 4,34       | Acumulada | -0,03    | Satisfactorio | Método     |
| 8       |          | Triglicéridos    | Roche Cobas c111 | Enzymatic, end point                      | 82.20    | mg/dL      | 83,68    | mg/dL     | 5,93       | Acumulada | -0,25    | Satisfactorio | Método     |
| 9       |          | Urea             | Roche Cobas c111 | Urease, UV                                | 95.76    | mg/dL      | 93,04    | mg/dL     | 6,19       | Acumulada | 0,44     | Satisfactorio | Método     |

| IT: Item                            |  | NOT: Notificaciones                                |  | VRL: Valor reportado por el laboratorio |  | U-LAB: Unidades de laboratorio |  | U-MC: Unidades Originales de la media de comparación |  |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| M-C: Media del grupo de comparación |  | DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación |  | T-C: Tipo de consenso                   |  | Zs: Z-score                    |  | VAL: Valoración                                      |  |
|                                     |  |                                                    |  |                                         |  |                                |  | COMP: Comparador                                     |  |

|                                                                   |                                                                    |                                                                      |                                                                                       |                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Satisfactorio</b><br>si su resultado está entre +/- 2 Z-score. | <b>Alarma</b><br>si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score. | <b>No satisfactorio</b><br>si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score. |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|                                                                   |                                                                    |                                                                      | Tardío                                                                                | Ausente                             | Revalorado                                                                            |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |  |                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------|
|  <p>“Quality Assurance Program”<br/>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica</p> | <p><b>Quality Assurance Program</b><br/><b>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</b><br/><b>QAP-Q - Química sanguínea</b></p> |  | Identificación  | 100209              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |  | Laboratorio:    |                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |  | Ronda:          | 55                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |  | Muestra:        | 5                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |  | Código Muestra: | CF2606              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |  | Fecha reporte:  | 2025-02-07          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |  | Estado:         | Evaluación original |

**3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM**

| 1    | 2          | 3   | 4     | 5               | 6                 | 7     | 8  | 9        | 10                              | 11         |
|------|------------|-----|-------|-----------------|-------------------|-------|----|----------|---------------------------------|------------|
| Item | Mensurando | VRL | U-LAB | X <sub>pt</sub> | U-X <sub>pt</sub> | M-REF | D% | ETmp/APS | Límites aceptación<br>Bajo Alto | Valoración |
|      |            |     |       |                 |                   |       |    |          |                                 |            |

|                                                |  |  |  |  |                                                                     |  |  |                                   |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| <b>VRL:</b> Valor reportado por el laboratorio |  |  |  |  | <b>U-X<sub>pt</sub>:</b> Unidades del valor aceptado como verdadero |  |  |                                   |  |  |
| <b>U-LAB:</b> Unidades de laboratorio          |  |  |  |  | <b>M-REF:</b> Método de referencia                                  |  |  | <b>D%</b> Diferencia porcentual % |  |  |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con $X_{pt}$ | No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con $X_{pt}$ | ETmp%/APS                                           | $X_{pt}$                      |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | Error Total máximo permisible<br>* Fuente CLIA 2022 | Valor aceptado como verdadero |



## Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100209              |
| Ronda:                      | 55                  |
| Muestra:                    | 5                   |
| Código Muestra:             | CF2606              |
| Fecha reporte:              | 2025-02-07          |
| Estado:                     | Evaluación original |

### 4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON $X_{PT}$ (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

#### ALT (ALAT/GPT)

**90.20 U/L** Roche Cobas c111



UV without P5P

CLIA  
2022

15% APS

| 1<br>Fuente de comparación           | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>            | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional   | 99,32         | 7,56      | 14747    | 84,2 a 114,44      | -9,18            | -1,21        | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3      | 96,54         | 5,62      | 70       | 85.31 a 107.78     | -6,57            | -1,13        | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología1 | 95,83         | 4,67      | 65       | 86.49 a 105.16     | -5,87            | -1,2         | Satisfactorio   |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

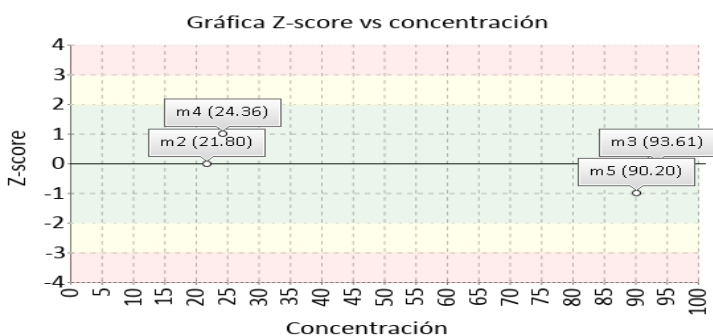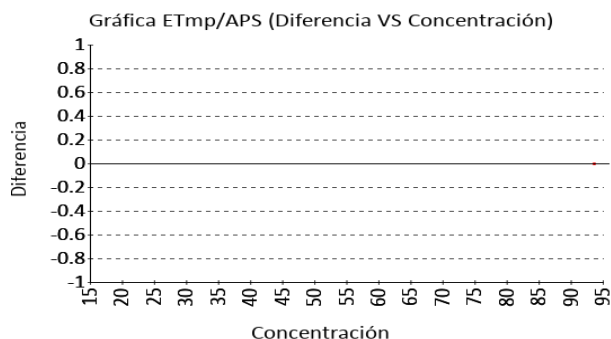

#### AST (ASAT/GOT)

**187.25 U/L** Roche Cobas c111



UV without P5P

CLIA  
2022

15% APS

| 1<br>Fuente de comparación           | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>            | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional   | 204,8         | 19,49     | 14202    | 165,82 a 243,78    | -8,57            | -0,9         | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3      | 209,79        | 15,22     | 76       | 179.35 a 240.23    | -10,74           | -1,48        | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología1 | 208,59        | 14,89     | 67       | 178.81 a 238.36    | -10,23           | -1,43        | Satisfactorio   |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

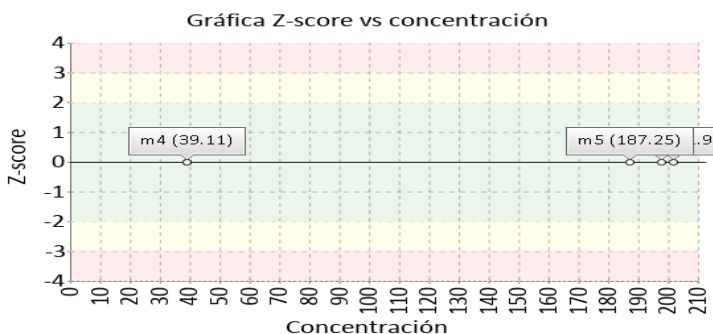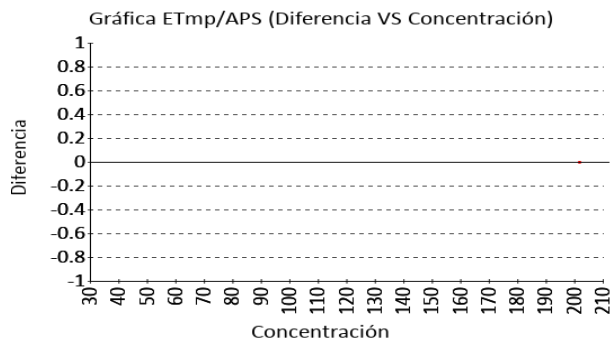

**Quality Assurance Program**  
**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO**  
**QAP-Q - Química sanguínea**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100209              |
| Ronda:                      | 55                  |
| Muestra:                    | 5                   |
| Código Muestra:             | CF2606              |
| Fecha reporte:              | 2025-02-07          |
| Estado:                     | Evaluación original |

**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON  $X_{PT}$  (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Colesterol HDL**

**21.43 mg/dL** Roche Cobas c111



Direct Enzymatic  
Colorimetric

CLIA  
2022

20% APS

| 1<br>Fuente de comparación                       | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>                        | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional               | 25,69         | 3,07      | 1873     | 19,55 a 31,83      | -16,58           | -1,39        | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3                  | 22,09         | 1,91      | 66       | 18,27 a 25,91      | -2,99            | -0,35        | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología <sup>1</sup> | 21,82         | 1,11      | 52       | 19,6 a 24,03       | -1,76            | -0,35        | Satisfactorio   |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

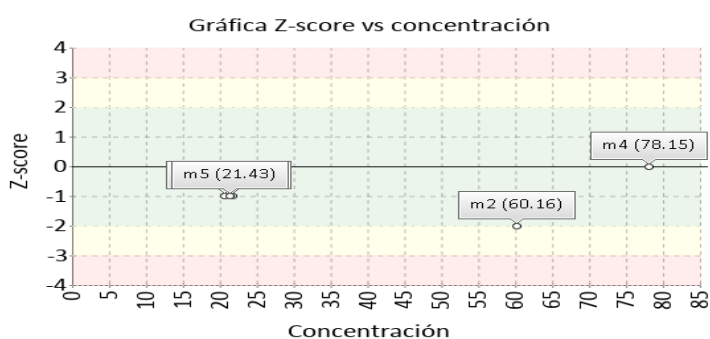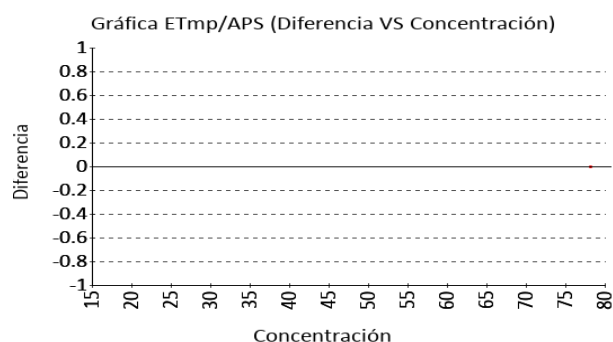

**Colesterol Total**

**88.33 mg/dL** Roche Cobas c111


Cholesterol oxidase,  
esterase, peroxidase

CLIA  
2022

10% APS

| 1<br>Fuente de comparación                       | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>                        | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional               | 92,95         | 4,94      | 10450    | 83,07 a 102,83     | -4,97            | -0,94        | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3                  | 92,01         | 5,28      | 80       | 81,44 a 102,57     | -4               | -0,7         | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología <sup>1</sup> | 91,88         | 5,25      | 78       | 81,38 a 102,38     | -3,86            | -0,68        | Satisfactorio   |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

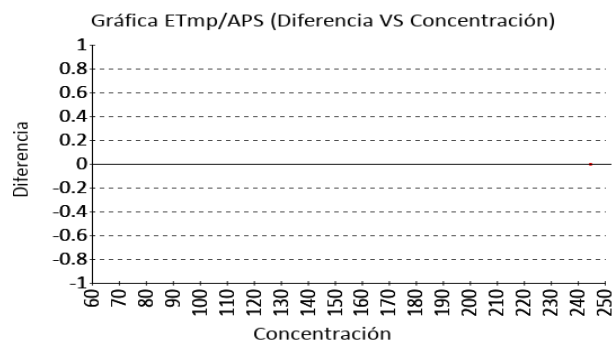



## Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100209              |
| Ronda:                      | 55                  |
| Muestra:                    | 5                   |
| Código Muestra:             | CF2606              |
| Fecha reporte:              | 2025-02-07          |
| Estado:                     | Evaluación original |



### 4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON $X_{PT}$ (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

#### Creatinina

**5.03 mg/dL** Roche Cobas c111 Enzymatic IFCC-IDMS Standardized CLIA 2022 10% APS

| 1<br>Fuente de comparación           | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>            | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional   | 5,38          | 0,14      | 7103     | 5,1 a 5,66         | -6,51            | -2,54        | Alarma          |
| Todos los participantes de QAP3      | 5,23          | 0,2       | 82       | 4.82 a 5.64        | -3,82            | -0,98        | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología1 | 5,27          | 0,16      | 60       | 4.95 a 5.59        | -4,51            | -1,48        | Satisfactorio   |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

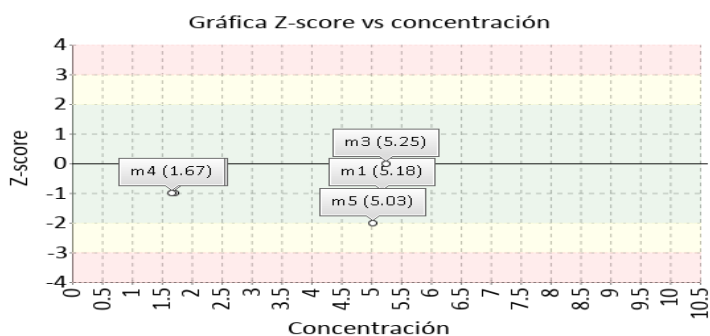
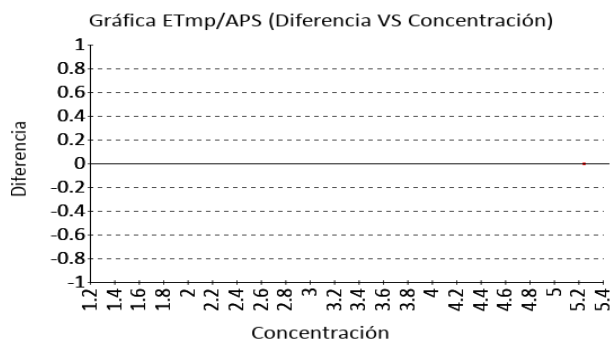


#### Glucosa

**285.24 mg/dL** Roche Cobas c111 Hexokinase CLIA 2022 8% APS

| 1<br>Fuente de comparación           | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>            | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional   | 289,2         | 6,22      | 869      | 276,76 a 301,64    | -1,37            | -0,64        | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3      | 286,02        | 10,3      | 82       | 265.42 a 306.62    | -0,27            | -0,08        | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología1 | 287,4         | 4,88      | 56       | 277.63 a 297.16    | -0,75            | -0,44        | Satisfactorio   |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

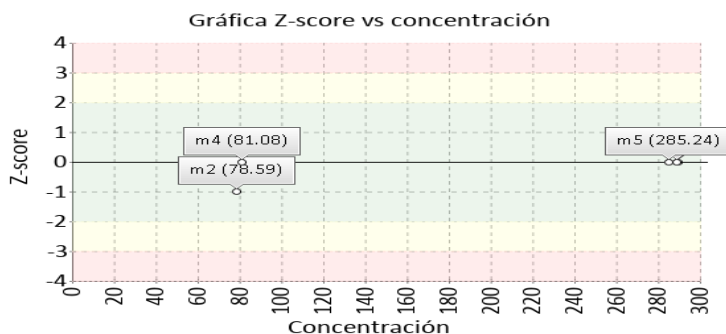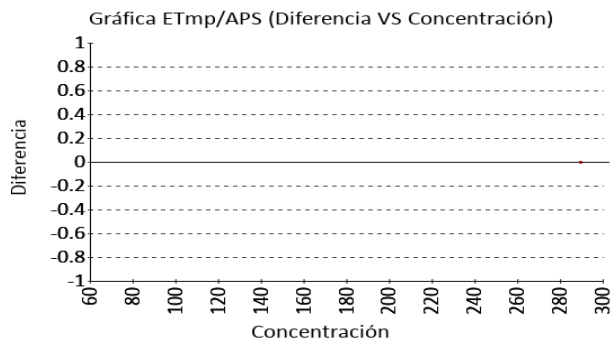



## Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100209              |
| Ronda:                      | 55                  |
| Muestra:                    | 5                   |
| Código Muestra:             | CF2606              |
| Fecha reporte:              | 2025-02-07          |
| Estado:                     | Evaluación original |

### 4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON $X_{PT}$ (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

#### Nitrógeno Uréico

**44.33 mg/dL** Roche Cobas c111



Urease, UV

CLIA  
2022

9% APS

| 1<br>Fuente de comparación                       | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>                        | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional               | 44,46         | 4,34      | 15205    | 35,78 a 53,14      | -0,29            | -0,03        | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3                  | 42,79         | 2,29      | 62       | 38,21 a 47,37      | 3,6              | 0,67         | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología <sup>1</sup> | 42,95         | 2,08      | 53       | 38,8 a 47,11       | 3,21             | 0,66         | Satisfactorio   |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

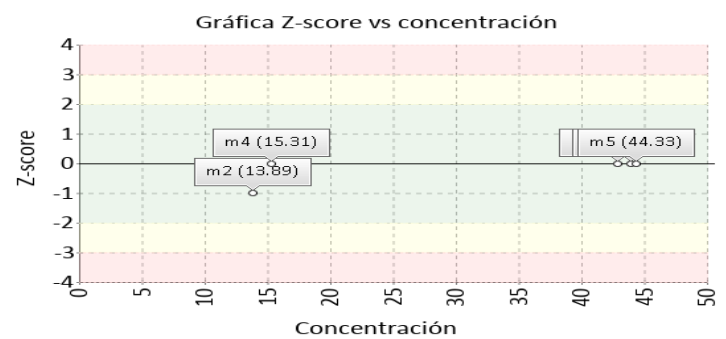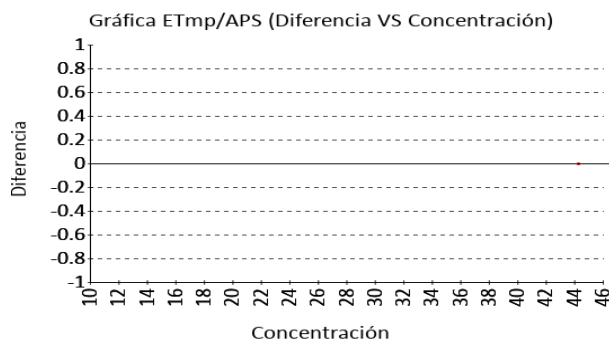

#### Triglicéridos

**82.20 mg/dL** Roche Cobas c111



Enzymatic, end point

CLIA  
2022

15% APS

| 1<br>Fuente de comparación                       | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>                        | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional               | 83,68         | 5,93      | 28069    | 71,82 a 95,54      | -1,77            | -0,25        | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3                  | 80,48         | 5,65      | 83       | 69,18 a 91,77      | 2,14             | 0,31         | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología <sup>1</sup> | 81,21         | 4,82      | 65       | 71,57 a 90,85      | 1,22             | 0,21         | Satisfactorio   |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

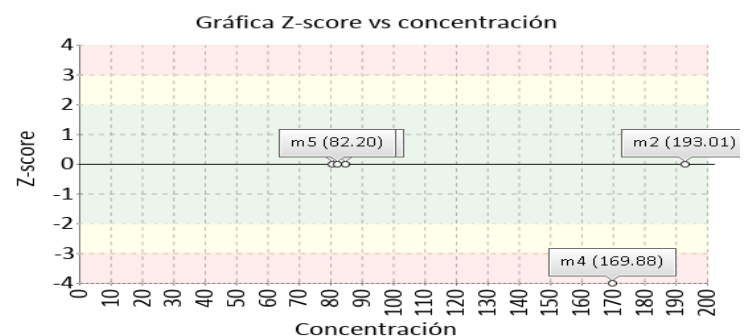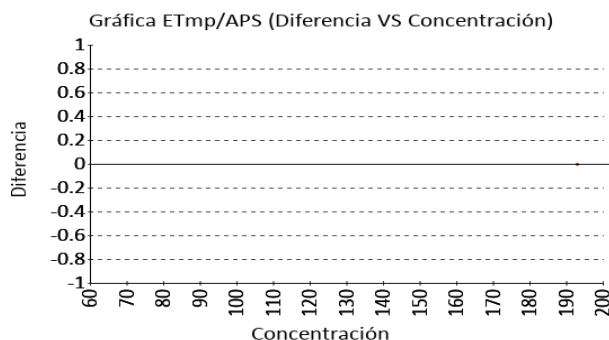


|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  |                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| <div></div> <div>“Quality Assurance Program”</div> <div>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica</div> | <div>Quality Assurance Program</div> <div>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</div> <div>QAP-Q - Química sanguínea</div> |  | Identificación  | 100209              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  | Laboratorio:    |                     |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  | Ronda:          | 55                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  | Muestra:        | 5                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  | Código Muestra: | CF2606              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  | Fecha reporte:  | 2025-02-07          |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  | Estado:         | Evaluación original |

**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON  $X_{PT}$  (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

|             |                    |                  |            |              |        |
|-------------|--------------------|------------------|------------|--------------|--------|
| <b>Urea</b> | <b>95.76 mg/dL</b> | Roche Cobas c111 | Urease, UV | CLIA<br>2022 | 9% APS |
|-------------|--------------------|------------------|------------|--------------|--------|

| 1<br>Fuente de comparación           | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>            | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional   | 93,04         | 6,19      | 12958    | 80,66 a 105,42     | 2,92             | 0,44         | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3      | 91,12         | 4,54      | 35       | 82.05 a 100.2      | 5,09             | 1,02         | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología1 | 91,26         | 4,53      | 34       | 82.21 a 100.32     | 4,93             | 0,99         | Satisfactorio   |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

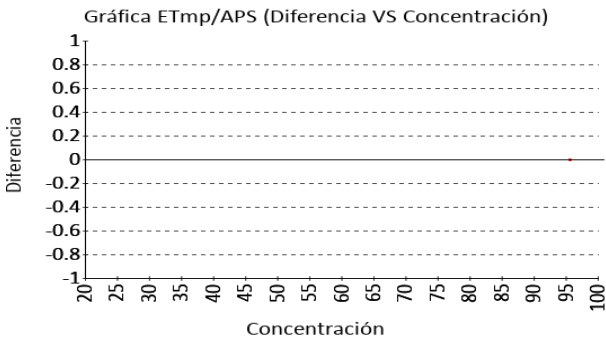

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  |                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------|
|  <p>“Quality Assurance Program”<br/>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica</p> | <p align="center"><b>Quality Assurance Program</b><br/><b>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</b><br/><b>QAP-Q - Química sanguínea</b></p> |  |  |  | Identificación Laboratorio: | 100209              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Ronda:                      | 55                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Muestra:                    | 5                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Código Muestra:             | CF2606              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Fecha reporte:              | 2025-02-07          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Estado:                     | Evaluación original |

**5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA**

| 1    | 2                | 3                | 4                                         | 5                                              | 6                                             | 7                                           | 8                      |
|------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Ítem | Mensurando       | Analizador       | Metodología declarada por el fabricante   | Metodología de referencia avalada por el JCTLM | Material trazable declarado por el fabricante | Material de referencia avalado por el JCTLM | Estado de trazabilidad |
| 1    | ALT (ALAT/GPT)   | Roche Cobas c111 | UV without P5P                            |                                                | No declarado                                  | 134                                         | No trazable            |
| 2    | AST (ASAT/GOT)   | Roche Cobas c111 | UV without P5P                            |                                                | No declarado                                  | 135                                         | No trazable            |
| 3    | Colesterol HDL   | Roche Cobas c111 | Direct Enzymatic Colorimetric             |                                                | No declarado                                  | 137                                         | No trazable            |
| 4    | Colesterol Total | Roche Cobas c111 | Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase |                                                | No declarado                                  | 139                                         | No trazable            |
| 5    | Creatinina       | Roche Cobas c111 | Enzymatic IFCC-IDMS Standardized          |                                                | No declarado                                  |                                             | No trazable            |
| 6    | Glucosa          | Roche Cobas c111 | Hexokinase                                |                                                | No declarado                                  | 142                                         | No trazable            |
| 7    | Nitrógeno Uréico | Roche Cobas c111 | Urease, UV                                |                                                | No declarado                                  |                                             | No trazable            |
| 8    | Triglicéridos    | Roche Cobas c111 | Enzymatic, end point                      |                                                | No declarado                                  |                                             | No trazable            |
| 9    | Urea             | Roche Cobas c111 | Urease, UV                                |                                                | No declarado                                  |                                             | No trazable            |

Nomenclatura método

Nomenclatura materiales

**134:** ERM-AD454k/IFCC **135:** ERM-AD457/IFCC **137:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **139:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **142:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3007A

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  |                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| <div><br/>"Quality Assurance Program"<br/>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica</div> | <div>Quality Assurance Program</div> <div>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</div> <div>QAP-Q - Química sanguínea</div> |  | Identificación  | 100209              |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  | Laboratorio:    |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  | Ronda:          | 55                  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  | Muestra:        | 5                   |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  | Código Muestra: | CF2606              |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  | Fecha reporte:  | 2025-02-07          |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  | Estado:         | Evaluación original |

6. RESUMEN DE RONDA



| Ítem           | Mensurando       | Muestra 1            |         |                            | Muestra 2            |         |                            | Muestra 3            |         |                            | Muestra 4            |         |                            | Muestra 5            |         |                            | Muestra 6            |         |                            |
|----------------|------------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------|
|                |                  | Dif% con RL-MMT-JCTL | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP | Dif% con RL-MMT-JCTL | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP | Dif% con RL-MMT-JCTL | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP | Dif% con RL-MMT-JCTL | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP | Dif% con RL-MMT-JCTL | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP | Dif% con RL-MMT-JCTL | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP |
| 1              | ALT (ALAT/GPT)   | N/A                  | -0.85   | -0.58                      | N/A                  | -0.77   | -1.25                      | N/A                  | -0.76   | -0.44                      | N/A                  | 1.57    | 0.26                       | N/A                  | -1.21   | -1.13                      |                      |         |                            |
| 2              | AST (ASAT/GOT)   | N/A                  | -0.36   | -0.55                      | N/A                  | 0.87    | -0.53                      | N/A                  | -0.15   | -0.28                      | N/A                  | -0.99   | -1                         | N/A                  | -0.9    | -1.48                      |                      |         |                            |
| 3              | Colesterol HDL   | N/A                  | -1.61   | -1.07                      | N/A                  | -2.23   | -1.55                      | N/A                  | -1.27   | -0.12                      | N/A                  | -0.17   | 0.02                       | N/A                  | -1.39   | -0.35                      |                      |         |                            |
| 4              | Colesterol Total | N/A                  | -1.37   | -0.93                      | N/A                  | -1.09   | -1.1                       | N/A                  | -0.54   | 0.01                       | N/A                  | -2      | -1.76                      | N/A                  | -0.94   | -0.7                       |                      |         |                            |
| 5              | Creatinina       | N/A                  | -1.45   | -0.21                      | N/A                  | -1.52   | -0.84                      | N/A                  | -0.94   | 0.18                       | N/A                  | -1.76   | -0.58                      | N/A                  | -2.54   | -0.98                      |                      |         |                            |
| 6              | Glucosa          | N/A                  | 0.05    | 0.5                        | N/A                  | -1.18   | -0.85                      | N/A                  | -0.03   | 0.66                       | N/A                  | -0.34   | -0.3                       | N/A                  | -0.64   | -0.08                      |                      |         |                            |
| 7              | Nitrógeno Uréico | N/A                  | -0.36   | 0.2                        | N/A                  | -1.26   | -1.56                      | N/A                  | -0.12   | 0.53                       | N/A                  | -0.04   | 0.17                       | N/A                  | -0.03   | 0.67                       |                      |         |                            |
| 8              | Triglicéridos    | N/A                  | -0.49   | 0.13                       | N/A                  | -0.25   | -0.22                      | N/A                  | 0.21    | 0.84                       | N/A                  | -6.01   | -4.2                       | N/A                  | -0.25   | 0.31                       |                      |         |                            |
| 9              | Urea             | N/A                  | -0.18   | 0.28                       | N/A                  | -0.84   | -0.48                      | N/A                  | 0.16    | 0.78                       | N/A                  | 1.3     | 1.02                       | N/A                  | 0.44    | 1.02                       |                      |         |                            |
| Notificaciones |                  | 0 0 0 0              |         |                            | 0 0 0 0              |         |                            | 0 0 0 0              |         |                            | 0 0 0 0              |         |                            | 0 0 0 0              |         |                            | 0 0 0 0              |         |                            |

|                                                                                           |                                                                                   |                                                                   |                                                                    |                                                                      |                      |                                                                                            |                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $X_{pt}$ - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible. | $X_{pt}$ - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible. | <b>Satisfactorio</b><br>si su resultado está entre +/- 2 Z-score. | <b>Alarma</b><br>si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score. | <b>No satisfactorio</b><br>si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score. | <b>N/A</b> No aplica |  Tardío | <input checked="" type="checkbox"/> Ausente |  Revalorado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|  <p>“Quality Assurance Program”<br/>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica</p> | <p align="center"><b>Quality Assurance Program</b><br/><b>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</b><br/><b>QAP-Q - Química sanguínea</b></p> | Identificación Laboratorio: | 100209              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Ronda:                      | 55                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Muestra:                    | 5                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Código Muestra:             | CF2606              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Fecha reporte:              | 2025-02-07          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Estado:                     | Evaluación original |

## 7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

### 7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 5 MUESTRAS
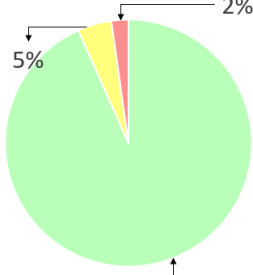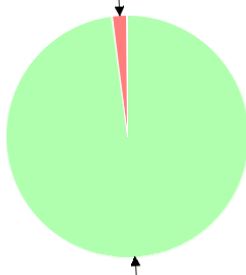
|                                                                                                                              |        |                  |                                     |                  |                                                                                                                         |        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <p>EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN</p>  |        |                  | <p>EVALUACIÓN CON RL-MMT-JCTLM.</p> |                  | <p>EVALUACIÓN PARTICIPANTES QAP</p>  |        |                  |
| Satisfactorio                                                                                                                | Alarma | No satisfactorio | Satisfactorio                       | No satisfactorio | Satisfactorio                                                                                                           | Alarma | No satisfactorio |
| 42                                                                                                                           | 2      | 1                | 0                                   | 0                | 44                                                                                                                      | 0      | 1                |
| 93.33%                                                                                                                       | 4.44%  | 2,22%            | 0%                                  | 0%               | 97,78%                                                                                                                  | 0%     | 2,22%            |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Observaciones: | Revisado por: |
|                | Fecha:        |
|                |               |

-- Final de reporte --

*Maria Paula Mora E.*

Aprobado por:  
Coordinador QAP  
Programas QAP

**Coordinador QAP:**  
**María Paula Mora Gamboa**  
**Contacto: 3174399931**  
**Correo: maria.mora@quik.com.co**