



QAP-Hematología

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QAP-H - Hematología

CHRISTUS SINERGIA SEDE BOGOTÁ TORRE 102

Correo electrónico: elsy.urrego@christus.co
Dirección: Calle 102 No 14A 70 Torre 102 Piso 1- mezanine -
piso 2
Ciudad: Bogotá Distrito Capital
País: Colombia
Contacto: Elsy Yadira Urrego Forero
Teléfono: 3004882315

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100237

Código de reporte: QAP-H-100237-43-4
Ronda: 43
Muestra: 4
Código de la muestra: DS1224
Tipo de muestra: Líquido- Eritrocitos humanos estabilizados
Fecha generación: 22 / febrero / 2025



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-H - Hematología

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	43
Muestra:	4
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-11
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos. Los detalles de preparación y manejo del control se encuentran en el inserto de cada programa.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. Los valores asignados de la sección 3 se obtienen de laboratorios clínicos con metodologías o materiales de referencia trazables al "Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine" (JCTLM).

Diseño de los programas QAP:

Los programas QAP LC están compuestos por rondas de acuerdo con la frecuencia establecida para cada programa. Las matrices utilizadas con conmutables con las muestras de las pacientes procesadas en la cotidianidad del laboratorio. El valor asignado se obtiene a partir de una comparación interlaboratorios a nivel internacional, el consenso QAP y/o un laboratorio con material o metodología de referencia trazable al JCTLM.

Para el análisis estadístico de los datos se realizan los siguientes cálculos:

Formula Desviación Estandar:

$$\text{Desviación estándar} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Formula Media:

$$\text{Media} = \frac{\sum \text{todos los datos}}{\text{Número de datos}}$$

Formula Zscore:

$$Z - \text{score} = \frac{\text{Resultado reportado por el laboratorio} - \bar{x} \text{ de consenso}}{D.E. \text{ del grupo consenso}}$$

Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} \pm D.E * k$$

 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología	Identificación Laboratorio:	100237
		Ronda:	43
		Muestra:	4
		Código Muestra:	DS1224
		Fecha reporte:	2025-02-11
		Estado:	Evaluación original

2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

1 IT	2 NOT	3 Mensurando	4 Analizador	5 Método	6 VRL	7 U-LAB	8 M-C	9 U-MC	10 DE-C	11 T-C	12 Zs	13 VAL	14 COMP
1		Ancho de distribución del eritrocito	SYSMEX XN - 450	Calculado	18.8	%	18,23	%	1,27	Acumulada	0,45	Satisfactorio	Método
2		Concentración de hemoglobina corpuscular media	SYSMEX XN - 450	Calculado	33.7	g/dL	32,94	g/dL	2,47	Mensual	0,31	Satisfactorio	Método
3		Hematocrito	SYSMEX XN - 450	Calculado	17.2	%	17,75	%	0,84	Acumulada	-0,65	Satisfactorio	Método
4		Hemoglobina	SYSMEX XN - 450	Colorimetric	5.8	g/dL	5,96	g/dL	0,33	Acumulada	-0,49	Satisfactorio	Método
5		Hemoglobina corpuscular media	SYSMEX XN - 450	Calculado	25.9	pg/cell	25,89	pg/cell	0,87	Acumulada	0,01	Satisfactorio	Método
6		Recuento de glóbulos blancos	SYSMEX XN - 450	Citometría de flujo	0.79	K/uL	3,07	K/uL	0,23	Consenso	-9,91	No satisfactorio	Todos los laboratorios
7		Recuento de glóbulos rojos	SYSMEX XN - 450	Electrical impedance	2.24	M/uL	2,3	M/uL	0,09	Acumulada	-0,68	Satisfactorio	Método
8		Recuento de plaquetas	SYSMEX XN - 450	Electrical impedance	44	K/uL	41,44	K/uL	3,41	Consenso	0,75	Satisfactorio	Todos los laboratorios
9		Volumen corpuscular medio	SYSMEX XN - 450	Electrical impedance	76.8	fL	78,86	fL	4,16	Acumulada	-0,5	Satisfactorio	Método
10		Volumen plaquetario medio	SYSMEX XN - 450	Electrical impedance	11.1	fL	10,71	fL	0,81	Acumulada	0,48	Satisfactorio	Método

IT: Ítem		NOT: Notificaciones		VRL: Valor reportado por el laboratorio		U-LAB: Unidades de laboratorio		U-MC: Unidades Originales de la media de comparación			
M-C: Media del grupo de comparación		DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación		T-C: Tipo de consenso		Zs: Z-score		VAL: Valoración		COMP: Comparador	

Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	 Tardío	☒ Ausente	 Revalorado
---	--	--	---	--	---

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología		Identificación	100237
			Laboratorio:	
			Ronda:	43
			Muestra:	4
			Código Muestra:	DS1224
			Fecha reporte:	2025-02-11
			Estado:	Evaluación original

3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Mensurando	VRL	U-LAB	X _{pt}	U-X _{pt}	M-REF	D%	ETmp/APS	Límites aceptación Bajo Alto	Valoración

VRL: Valor reportado por el laboratorio			U-Xpt: Unidades del valor aceptado como verdadero		
U-LAB: Unidades de laboratorio		M-REF:Método de referencia		D% Diferencia porcentual %	

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X _{pt}		No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X _{pt}		ETmp%/APS Error Total máximo permisible * Fuente VB MIN.EFLM.2024		X _{pt} Valor aceptado como verdadero	
---	--	--	--	---	--	--	--



Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	43
Muestra:	4
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-11
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)



Ancho de distribución del eritrocito

18.8 % SYSMEX XN - 450

Calculado VB MIN. 3.8% APS
EFLM.2
024

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	18,23	1,27	509	15,69 a 20,77	3,13	0,45	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	17,86	1,08	35	15,69 a 20,02	5,29	0,87	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	17,77	0,98	33	15,81 a 19,74	5,79	1,05	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

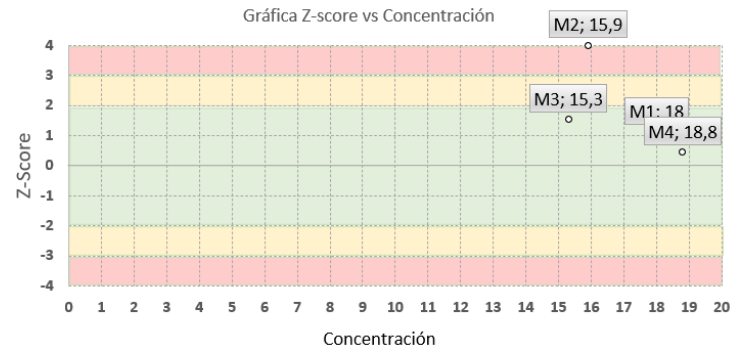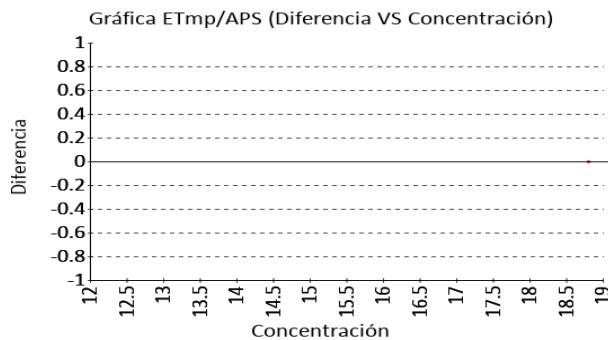



Concentración de hemoglobina corpuscular media

33.7 g/dL SYSMEX XN - 450

Calculado VB MIN. 1.9% APS
EFLM.2
024

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	32,94	2,47	507	28 a 37,88	2,31	0,31	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	32,29	2,15	49	27,99 a 36,58	4,37	0,66	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	32,28	2,16	47	27,95 a 36,6	4,41	0,66	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

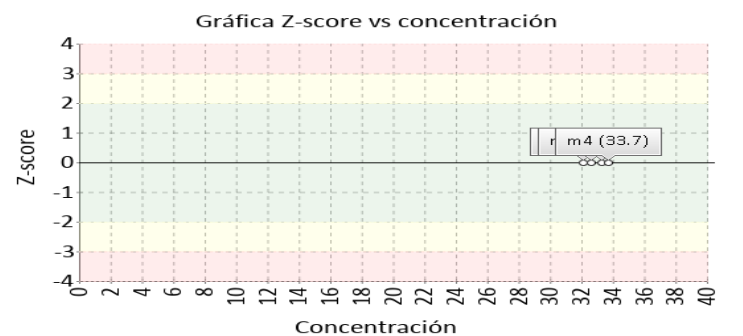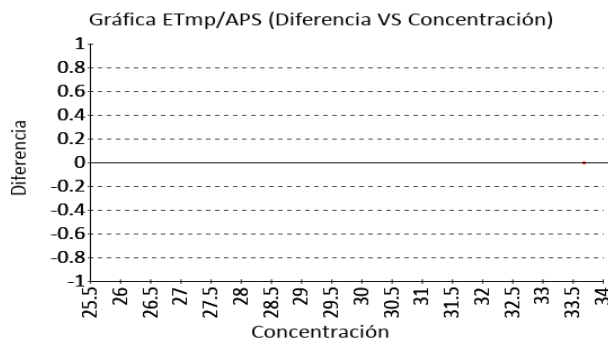



Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	43
Muestra:	4
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-11
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Hematocrito

17.2 % SYSMEX XN - 450



Calculado

CLIA
2022

4% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	17,75	0,84	661	16,06 a 19,44	-3,1	-0,65	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	18,19	1,05	49	16,08 a 20,29	-5,44	-0,94	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	18,24	1,04	45	16,15 a 20,32	-5,68	-1	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

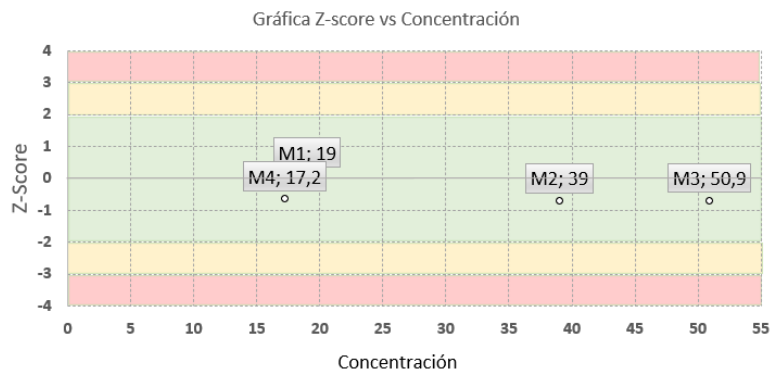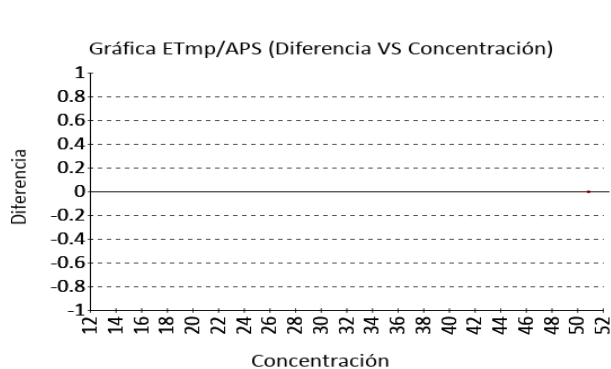

Hemoglobina

5.8 g/dL SYSMEX XN - 450



Colorimetric

CLIA
2022

4% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	5,96	0,33	880	5,3 a 6,62	-2,68	-0,49	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	5,93	0,17	46	5,59 a 6,26	-2,12	-0,76	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	5,93	0,16	17	5,61 a 6,25	-2,18	-0,8	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

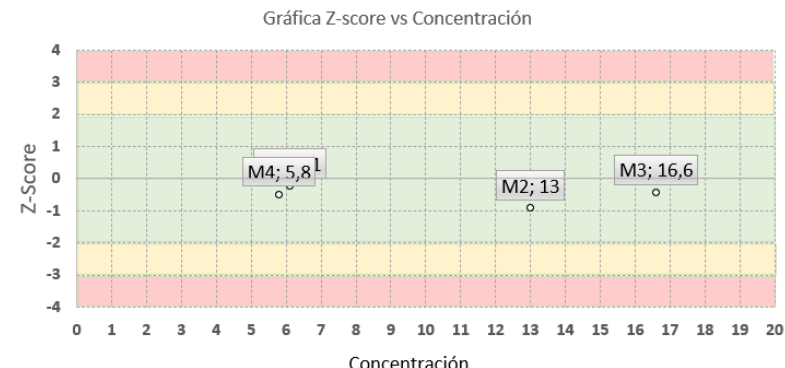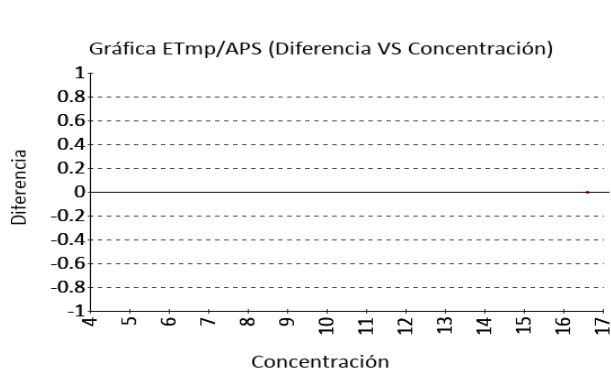



Quality Assurance Program **PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO** **QAP-H - Hematología**

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	43
Muestra:	4
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-11
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)



Hemoglobina corpuscular media

25.9 pg/cell SYSMEX XN - 450

Calculado VB MIN. 2.6% APS
EFLM.2
024

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	25,89	0,87	902	24,16 a 27,62	0,04	0,01	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	25,32	0,89	44	23,55 a 27,09	2,28	0,65	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	25,32	0,9	43	23,53 a 27,11	2,29	0,65	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

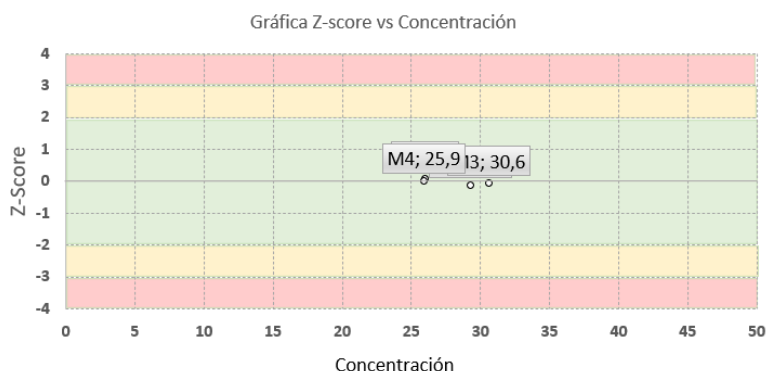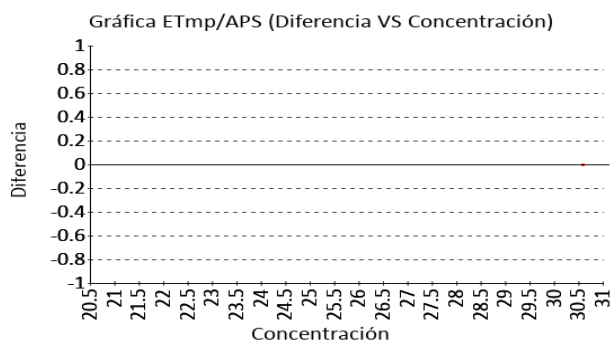



Recuento de glóbulos blancos

0.79 K/uL SYSMEX XN - 450

Citometría de flujo CLIA 2022 10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	3,07	0,23	42	2,61 a 3,53	-74,27	-9,91	No satisfactorio
Participantes QAP misma metodología2	1,81	1,5	9	-1,19 a 4,8	-56,24	-0,68	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

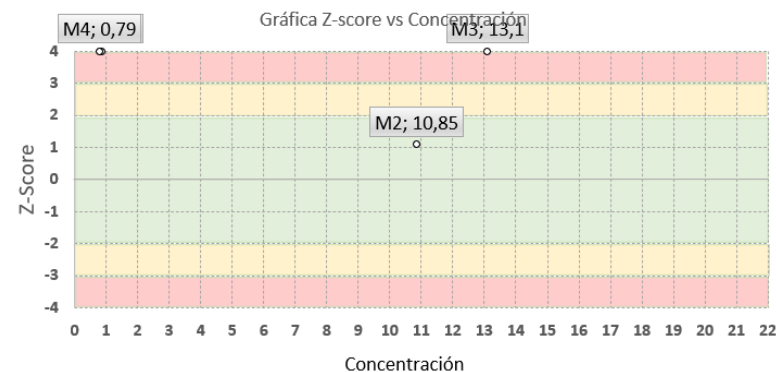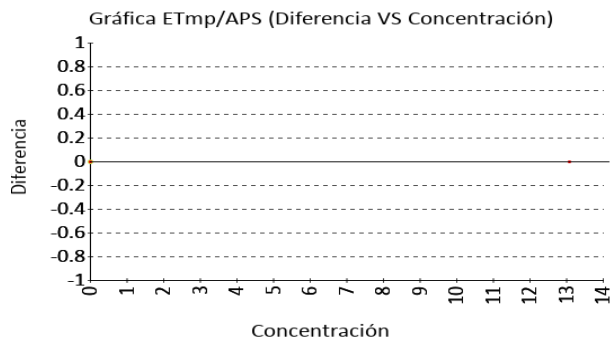

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología				Identificación Laboratorio:	100237
					Ronda:	43
					Muestra:	4
					Código Muestra:	DS1224
					Fecha reporte:	2025-02-11
					Estado:	Evaluación original


4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Recuento de glóbulos rojos

2.24 M/uL SYSMEX XN - 450 Electrical impedance CLIA 2022 4% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	2,3	0,09	790	2,12 a 2,48	-2,61	-0,68	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	2,31	0,09	50	2,13 a 2,49	-3,19	-0,82	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	2,33	0,08	45	2,17 a 2,49	-3,77	-1,09	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

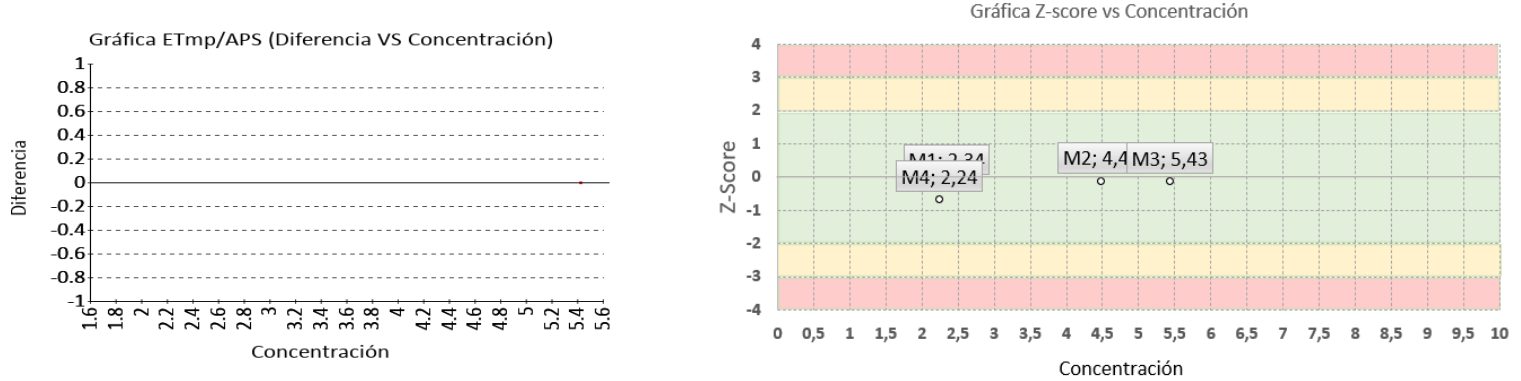


Recuento de plaquetas

44 K/uL SYSMEX XN - 450 Electrical impedance CLIA 2022 25% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	41,44	3,41	47	34.62 a 48.26	6,18	0,75	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología2	41,53	2,7	41	36.12 a 46.94	5,95	0,91	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

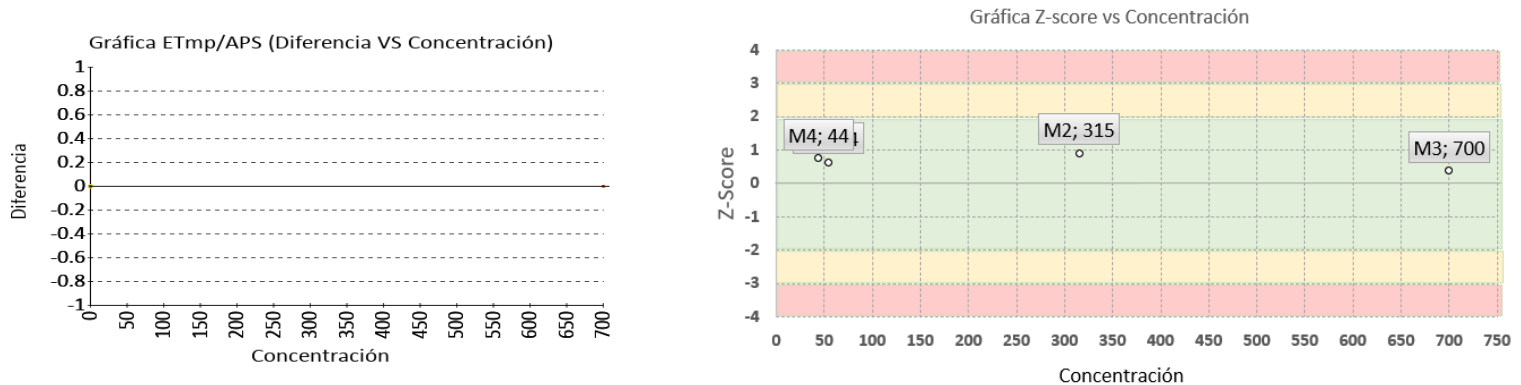



Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	43
Muestra:	4
Código Muestra:	DS1224
Fecha reporte:	2025-02-11
Estado:	Evaluación original



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Volumen corpuscular medio

76.8 fL SYSMEX XN - 450 Electrical impedance VB MIN. 2.5% APS
EFLM.2
024

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	78,86	4,16	787	70,54 a 87,18	-2,61	-0,5	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	79	2,6	42	73.81 a 84.19	-2,78	-0,85	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	79,43	2,31	29	74.81 a 84.06	-3,31	-1,14	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

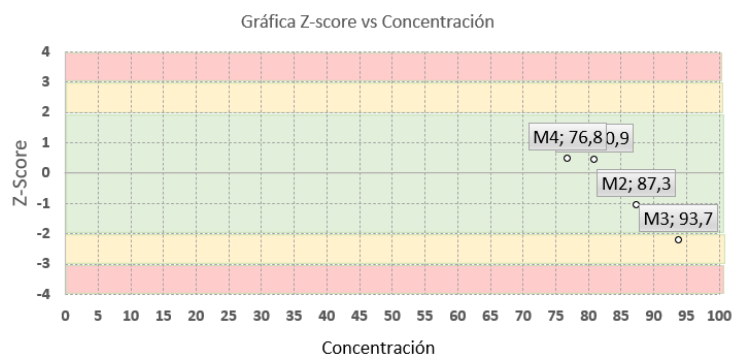
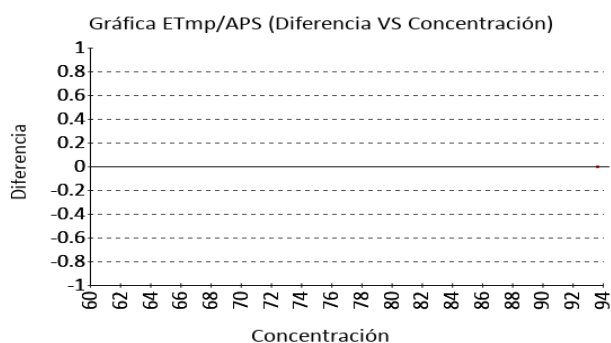


Volumen plaquetario medio

11.1 fL SYSMEX XN - 450 Electrical impedance VB MIN. 5.6% APS
EFLM.2
024

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	10,71	0,81	492	9,08 a 12,34	3,64	0,48	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	11,17	0,35	35	10.46 a 11.88	-0,63	-0,2	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	11,24	0,37	19	10.51 a 11.97	-1,25	-0,38	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

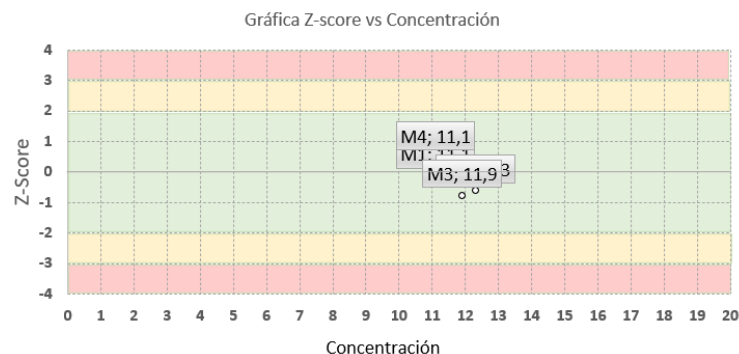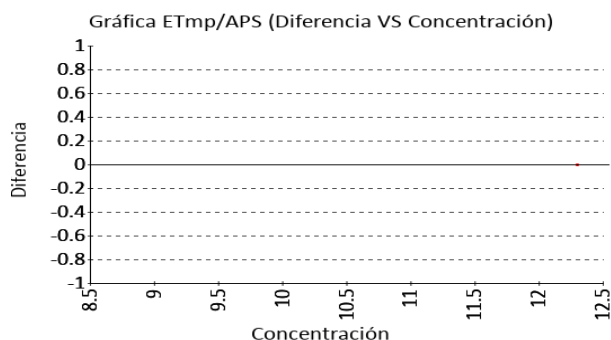

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología	Identificación	100237
		Laboratorio:	
		Ronda:	43
		Muestra:	4
		Código Muestra:	DS1224
		Fecha reporte:	2025-02-11
		Estado:	Evaluación original

5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Ancho de distribución del eritrocito	SYSMEX XN - 450	Calculado		No declarado		No trazable
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	SYSMEX XN - 450	Calculado		No declarado		No trazable
3	Hematocrito	SYSMEX XN - 450	Calculado		No declarado		No trazable
4	Hemoglobina	SYSMEX XN - 450	Colorimetric	110 38	No declarado	130	No trazable
5	Hemoglobina corpuscular media	SYSMEX XN - 450	Calculado		No declarado		No trazable
6	Recuento de glóbulos blancos	SYSMEX XN - 450	Citometría de flujo		No declarado		No trazable
7	Recuento de glóbulos rojos	SYSMEX XN - 450	Electrical impedance	111	No declarado	131	No trazable
8	Recuento de plaquetas	SYSMEX XN - 450	Electrical impedance	112	No declarado	132	No trazable
9	Volumen corpuscular medio	SYSMEX XN - 450	Electrical impedance		No declarado		No trazable
10	Volumen plaquetario medio	SYSMEX XN - 450	Electrical impedance		No declarado		No trazable

Nomenclatura método
110: Spectrophotometry **38:** Spectroscopy after reaction with KCN **111:** Flow cytometry, cell differentiation by impedance or light scattering, coincidence correction by dilution series JCTLM DB identifier C16RMP1 **112:** Flow cytometry cell differentiation by fluorescence detection of antibody stained platelets and light scattering coincidence correction by dilution series JCTLM DB identifier C3RMMP35

Nomenclatura materiales
130: Lyophilized fresh or frozen whole blood **131:** Fresh or stabilized whole blood **132:** Fresh whole blood

 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología	Identificación	100237
		Laboratorio:	
		Ronda:	43
		Muestra:	4
		Código Muestra:	DS1224
		Fecha reporte:	2025-02-11
		Estado:	Evaluación original

6. RESUMEN DE RONDA



Ítem	Mensurando	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Muestra 4		
		Dif% con RL- MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP	Dif% con RL- MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP	Dif% con RL- MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP	Dif% con RL- MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP
1	Ancho de distribución del eritrocito	N/A	N/A	1,11	N/A	N/A	4,81	N/A	N/A	1,53	N/A	0,45	0,87
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	N/A	N/A	-0,08	N/A	N/A	0,33	N/A	N/A	0,5	N/A	0,31	0,66
3	Hematocrito	N/A	N/A	0,11	N/A	N/A	-0,7	N/A	N/A	-0,69	N/A	-0,65	-0,94
4	Hemoglobina	N/A	N/A	-0,24	N/A	N/A	-0,92	N/A	N/A	-0,43	N/A	-0,49	-0,76
5	Hemoglobina corpuscular media	N/A	N/A	0,09	N/A	N/A	-0,14	N/A	N/A	-0,06	N/A	0,01	0,65
6	Recuento de glóbulos blancos	N/A	N/A	-14,86	N/A	N/A	1,09	N/A	N/A	-8,54	N/A	N/A	-9,91
7	Recuento de glóbulos rojos	N/A	N/A	-0,18	N/A	N/A	-0,12	N/A	N/A	-0,14	N/A	-0,68	-0,82
8	Recuento de plaquetas	N/A	N/A	0,64	N/A	N/A	0,91	N/A	N/A	0,38	N/A	N/A	0,75
9	Volumen corpuscular medio	N/A	N/A	0,46	N/A	N/A	-1,03	N/A	N/A	-2,19	N/A	-0,5	-0,85
10	Volumen plaquetario medio	N/A	N/A	-0,12	N/A	N/A	-0,61	N/A	N/A	-0,76	N/A	0,48	-0,2
Notificaciones		0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0		

X_{pt} - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	X_{pt} - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	N/A No aplica	 Tardío	☒ Ausente	 Revalorado
---	---	---	--	--	----------------------	---	---	---

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-H - Hematología	Identificación	100237
		Laboratorio:	
		Ronda:	43
		Muestra:	4
		Código Muestra:	DS1224
		Fecha reporte:	2025-02-11
		Estado:	Evaluación original

7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 4 MUESTRAS

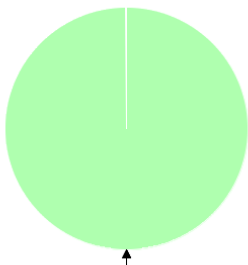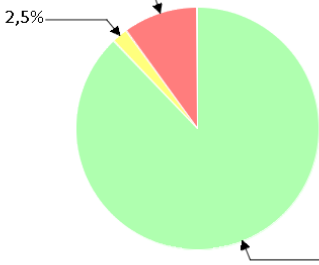EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN  100%			EVALUACIÓN CON RL-MMT-JCTLM.		EVALUACIÓN PARTICIPANTES QAP  10% 2,5% 87,5%		
Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio	Satisfactorio	No satisfactorio	Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
8	0	0	0	0	35	1	4
100%	0%	0%	0%	0%	87,5%	2,5%	10%

Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

Maria Paula Mora E.

Aprobado por:
Coordinador QAP
Programas QAP

Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Contacto: 3174399931
Correo: maria.mora@quik.com.co