



Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica



PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
QAP-H - Hematología

LABORATORIO CLÍNICO COLMÉDICOS IPS SAS. BOGOTÁ SEDE FUNZA

Correo electrónico: ingrid.bahamon@colmedicos.com.co
Dirección: Bogotá - Carrera 19A No 76-34
Ciudad: Bogotá Distrito Capital
País: Colombia
Contacto: Ingrid Bahamón
Teléfono: 3154337453

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100182

Código de reporte: QAP-H-100182-34-4
Ronda: 34
Muestra: 4
Código de la muestra: PL0814
Tipo de muestra: Líquido- Eritrocitos humanos estabilizados
Fecha generación: 22 / noviembre / 2022

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100182 |
| Ronda: | 34 |
| Muestra: | 4 |
| Código Muestra: | PL0814 |
| Fecha reporte: | 2022-11-16 |
| Estado: | Evaluación original |

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS como organización certificada ISO 27001:2013 ¹, y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ², garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de la seguridad de la información y en cumplimiento con el numeral.
- (2) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. y para los programas de patología anatómica con la fundación Santa Fé de Bogotá

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100182 |
| Ronda: | 34 |
| Muestra: | 4 |
| Código Muestra: | PL0814 |
| Fecha reporte: | 2022-11-16 |
| Estado: | Evaluación original |

2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

| 1 IT | 2 NOT | 3 Mensurando | 4 Analizador | 5 Método | 6 VRL | 7 U-LAB | 8 M-C | 9 U-MC | 10 DE-C | 11 T-C | 12 Zs | 13 VAL | 14 COMP |
|---------|----------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|------------------------|
| 1 | ☒ | Ancho de distribución del eritrocito | Sysmex XP-300 | Calculado | 10.9 | % | 13,25 | % | 1,84 | Consenso | -1,28 | Satisfactorio | Todos los laboratorios |
| 2 | ☒ | Concentración de hemoglobina corpuscular media | Sysmex XP-300 | Calculado | 34.9 | g/dL | 33,71 | g/dL | 2,75 | Consenso | 0,43 | Satisfactorio | Todos los laboratorios |
| 3 | ☒ | Hematocrito | Sysmex XP-300 | Calculado | 47.0 | % | 49,04 | % | 3,2 | Consenso | -0,64 | Satisfactorio | Todos los laboratorios |
| 4 | ☒ | Hemoglobina | Sysmex XP-300 | Photometric | 16.4 | g/dL | 16,48 | g/dL | 0,3 | Consenso | -0,27 | Satisfactorio | Todos los laboratorios |
| 5 | ☒ | Hemoglobina corpuscular media | Sysmex XP-300 | Calculado | 30.9 | pg/cell | 30,6 | pg/cell | 1,53 | Consenso | 0,2 | Satisfactorio | Todos los laboratorios |
| 6 | ☒ | Recuento de glóbulos blancos | Sysmex XP-300 | Electrical impedance | 19.5 | K/uL | 19,92 | K/uL | 1,15 | Consenso | -0,37 | Satisfactorio | Todos los laboratorios |
| 7 | ☒ | Recuento de glóbulos rojos | Sysmex XP-300 | Electrical impedance | 5.31 | M/uL | 5,37 | M/uL | 0,22 | Consenso | -0,27 | Satisfactorio | Todos los laboratorios |
| 8 | ☒ | Recuento de plaquetas | Sysmex XP-300 | Electrical impedance | 499 | K/uL | 493,96 | K/uL | 43,64 | Consenso | 0,12 | Satisfactorio | Todos los laboratorios |
| 9 | ☒ | Volumen corpuscular medio | Sysmex XP-300 | Electrical impedance | 88.5 | fL | 91,03 | fL | 4,69 | Consenso | -0,54 | Satisfactorio | Todos los laboratorios |
| 10 | ☒ | Volumen plaquetario medio | Sysmex XP-300 | Electrical impedance | 9.6 | fL | 9,28 | fL | 0,86 | Consenso | 0,37 | Satisfactorio | Todos los laboratorios |

| | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| IT: Item | NOT: Notificaciones | VRL: Valor reportado por el laboratorio | U-LAB: Unidades de laboratorio | U-MC: Unidades Originales de la media de comparación |
| M-C: Media del grupo de comparación | DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación | T-C: Tipo de consenso | Zs: Z-score | VAL: Valoración |
| COMP: Comparador | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score. | Alarma si su resultado está entre 2 y 3 Z-score. | No satisfactorio si su resultado es mayor a 3 Z-score. | ☒ | ☒ | ✎ |
| | | | Tardío | Ausente | Revalorado |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100182 |
| Ronda: | 34 |
| Muestra: | 4 |
| Código Muestra: | PL0814 |
| Fecha reporte: | 2022-11-16 |
| Estado: | Evaluación original |

3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM

| 1 Item | 2 Mensurando | 3 VRL | 4 U-LAB | 5 V.A.V. | 6 U-V.A.V. | 7 M-REF | 8 D% | 9 ETmp% | 10 Límites aceptación Bajo Alto | | 11 Valoración |
|-----------|----------------------------|----------|------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------|-------|------------------|
| 1 | Hemoglobina | 16.4 | g/dL | 15.900 | g/dL | Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica | 3,14 | 4 | 15,26 | 16,54 | Satisfactorio |
| 2 | Recuento de glóbulos rojos | 5.31 | M/uL | 5.310 | M/uL | Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica | 0 | 6 | 4,99 | 5,63 | Satisfactorio |
| 3 | Recuento de plaquetas | 499 | K/uL | 504.000 | K/uL | Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica | -0,99 | 25 | 378 | 630 | Satisfactorio |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| VRL: Valor reportado por el laboratorio | | | | U-V.A.V.: Unidades del valor aceptado como verdadero | | | | |
| U-LAB: Unidades de laboratorio | | | M-REF: Método de referencia | | | D%: Diferencia porcentual % | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V | No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V | ETmp Error Total máximo permisible * Fuente CAP | V.A.V. Valor aceptado como verdadero |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100182 |
| Ronda: | 34 |
| Muestra: | 4 |
| Código Muestra: | PL0814 |
| Fecha reporte: | 2022-11-16 |
| Estado: | Evaluación original |

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Ancho de distribución del eritrocito

10.9 %



Sysmex XP-300

Calculado

3% ETmp

| 1 Fuente de comparación | 2 V.A.V. | 3 D.E. | 4 n/N | 5 Incertidumbre | 6 Diferencia% | 7 Z-score | 8 Valoración |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| RL-MMT-JCTLM ¹ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Media de comparación internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Todos los participantes de QAP | 13,25 | 1,84 | 26 | 9,57 a 16,93 | -17,74 | -1,28 | Satisfactorio |
| Participantes QAP misma metodología | 12,95 | 1,93 | 31 | 9,09 a 16,82 | -15,86 | -1,06 | Satisfactorio |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

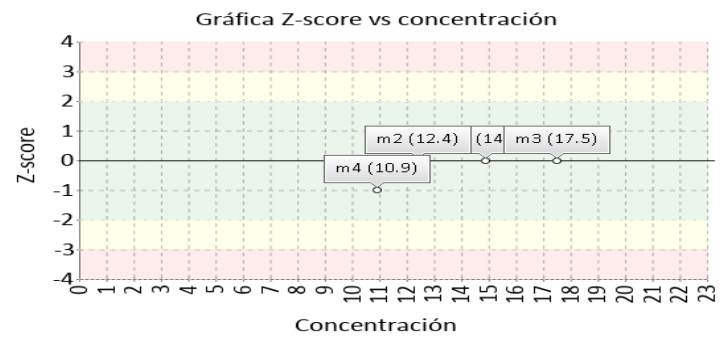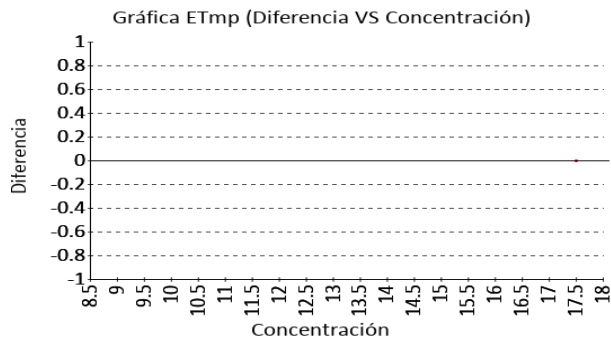

Concentración de hemoglobina corpuscular media

34.9 g/dL



Sysmex XP-300

Calculado

3% ETmp

| 1 Fuente de comparación | 2 V.A.V. | 3 D.E. | 4 n/N | 5 Incertidumbre | 6 Diferencia% | 7 Z-score | 8 Valoración |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| RL-MMT-JCTLM ¹ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Media de comparación internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Todos los participantes de QAP | 33,71 | 2,75 | 27 | 28,21 a 39,21 | 3,53 | 0,43 | Satisfactorio |
| Participantes QAP misma metodología | 33,83 | 2,54 | 32 | 28,76 a 38,91 | 3,15 | 0,42 | Satisfactorio |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

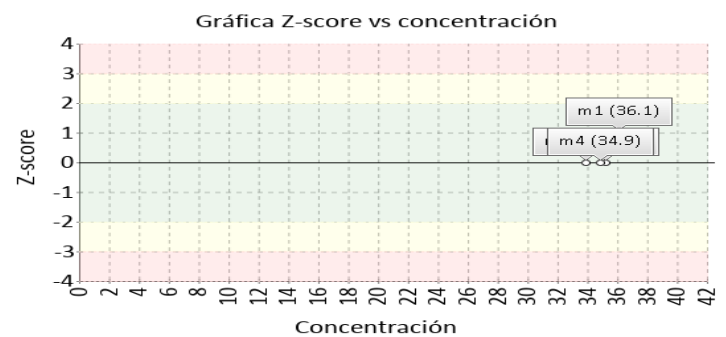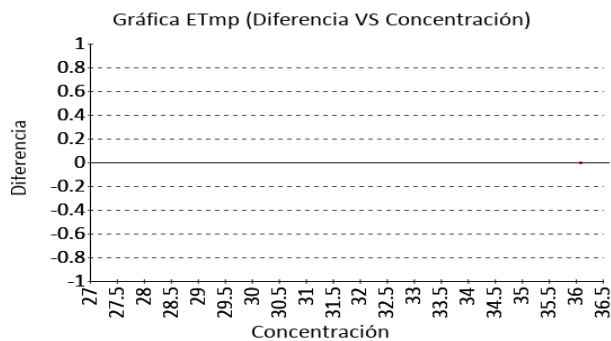

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Hematocrito

47.0 %

Sysmex XP-300


Calculado

6% ETmp


| 1 Fuente de comparación | 2 V.A.V. | 3 D.E. | 4 n/N | 5 Incertidumbre | 6 Diferencia% | 7 Z-score | 8 Valoración |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| RL-MMT-JCTLM ¹ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Media de comparación internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Todos los participantes de QAP | 49,04 | 3,2 | 27 | 42,64 a 55,44 | -4,16 | -0,64 | Satisfactorio |
| Participantes QAP misma metodología | 48,72 | 3,07 | 30 | 42,57 a 54,87 | -3,53 | -0,56 | Satisfactorio |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica ETmp (Diferencia VS Concentración)

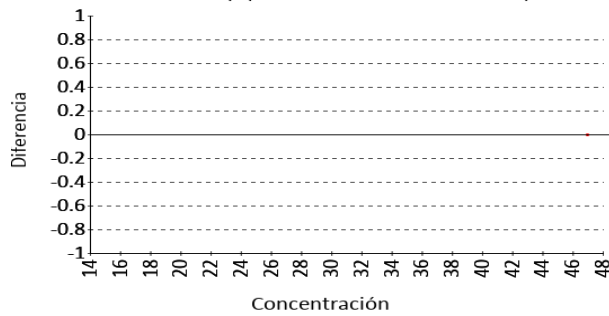

Gráfica Z-score vs concentración

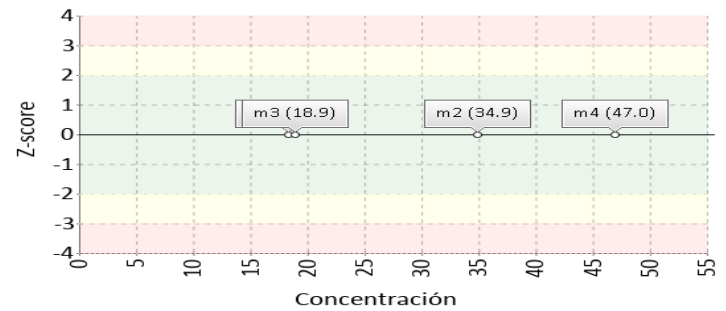

Hemoglobina

16.4 g/dL

Sysmex XP-300


Photometric

4% ETmp


| 1 Fuente de comparación | 2 V.A.V. | 3 D.E. | 4 n/N | 5 Incertidumbre | 6 Diferencia% | 7 Z-score | 8 Valoración |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| RL-MMT-JCTLM ¹ | 15,900 | N/A | N/A | N/A | -3,14 | N/A | Satisfactorio |
| Media de comparación internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Todos los participantes de QAP | 16,48 | 0,3 | 27 | 15,88 a 17,08 | -0,49 | -0,27 | Satisfactorio |
| Participantes QAP misma metodología | 16,42 | 0,29 | 21 | 15,84 a 17,01 | -0,14 | -0,08 | Satisfactorio |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica ETmp (Diferencia VS Concentración)

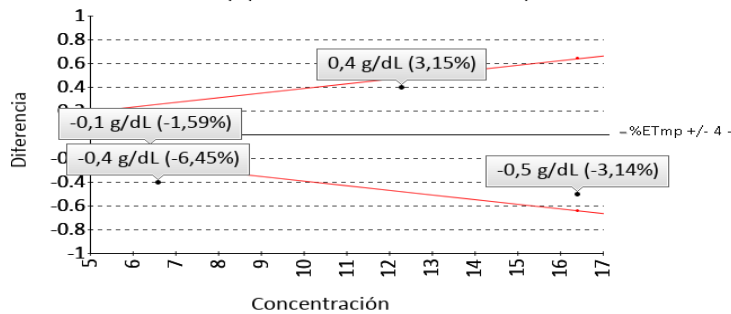

Gráfica Z-score vs concentración

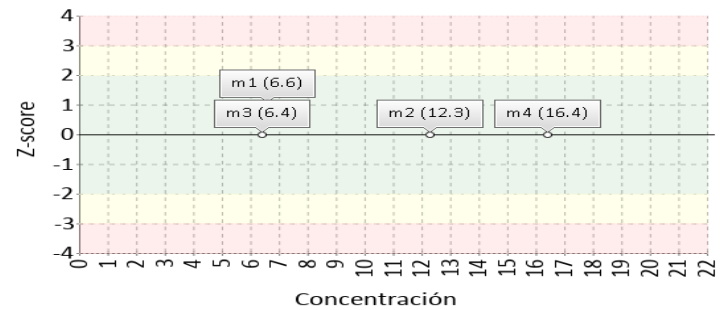

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Hemoglobina corpuscular media

30.9 pg/cell



Sysmex XP-300

Calculado

3% ETmp

| 1 Fuente de comparación | 2 V.A.V. | 3 D.E. | 4 n/N | 5 Incertidumbre | 6 Diferencia% | 7 Z-score | 8 Valoración |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| RL-MMT-JCTLM ¹ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Media de comparación internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Todos los participantes de QAP | 30,6 | 1,53 | 26 | 27,54 a 33,66 | 0,98 | 0,2 | Satisfactorio |
| Participantes QAP misma metodología | 30,64 | 1,43 | 31 | 27,78 a 33,51 | 0,84 | 0,18 | Satisfactorio |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

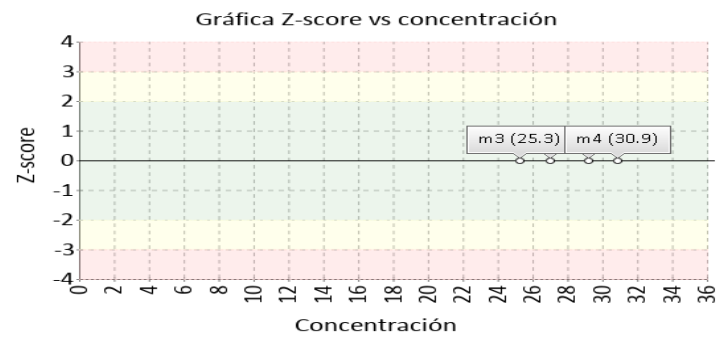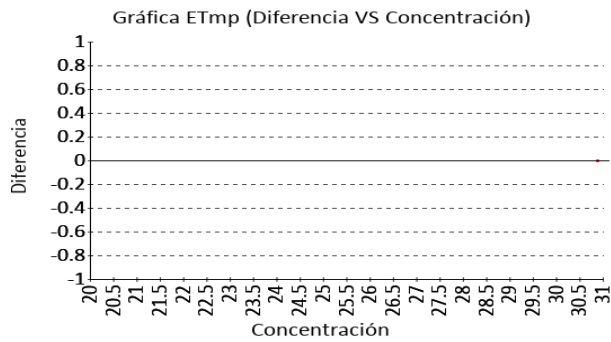

Recuento de glóbulos blancos



19.5 K/uL

Sysmex XP-300 Electrical impedance

15% ETmp

| 1 Fuente de comparación | 2 V.A.V. | 3 D.E. | 4 n/N | 5 Incertidumbre | 6 Diferencia% | 7 Z-score | 8 Valoración |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| RL-MMT-JCTLM ¹ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Media de comparación internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Todos los participantes de QAP | 19,92 | 1,15 | 25 | 17,62 a 22,22 | -2,11 | -0,37 | Satisfactorio |
| Participantes QAP misma metodología | 19,74 | 1,01 | 27 | 17,71 a 21,76 | -1,2 | -0,23 | Satisfactorio |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

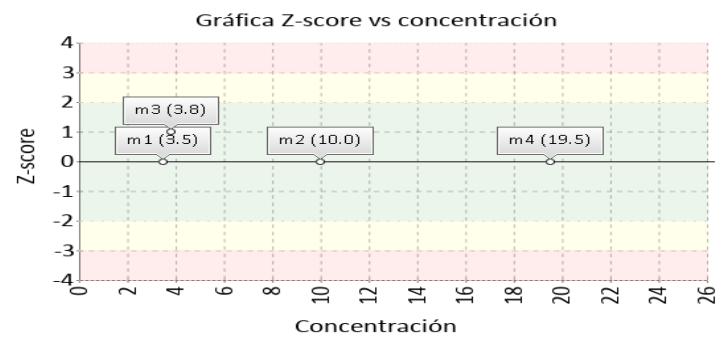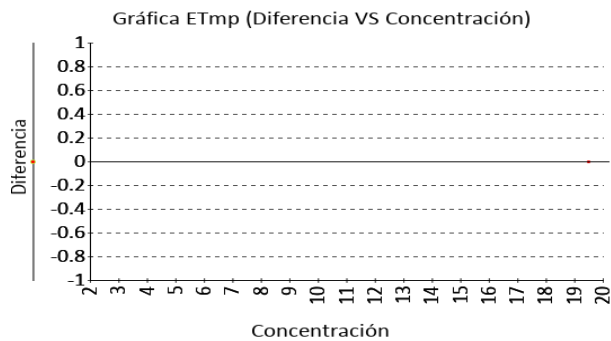

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Recuento de glóbulos rojos



5.31 M/uL

Sysmex XP-300 Electrical impedance

6% ETmp

| 1 Fuente de comparación | 2 V.A.V. | 3 D.E. | 4 n/N | 5 Incertidumbre | 6 Diferencia% | 7 Z-score | 8 Valoración |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| RL-MMT-JCTLM ¹ | 5.310 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | Satisfactorio |
| Media de comparación internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Todos los participantes de QAP | 5,37 | 0,22 | 27 | 4,93 a 5,81 | -1,12 | -0,27 | Satisfactorio |
| Participantes QAP misma metodología | 5,35 | 0,12 | 27 | 5,11 a 5,59 | -0,71 | -0,32 | Satisfactorio |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

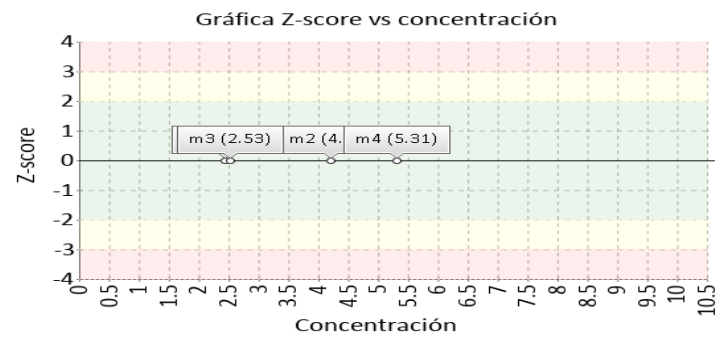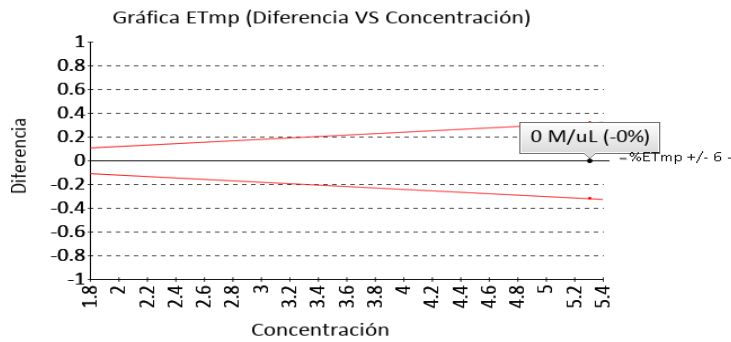

Recuento de plaquetas



499 K/uL

Sysmex XP-300 Electrical impedance

25% ETmp

| 1 Fuente de comparación | 2 V.A.V. | 3 D.E. | 4 n/N | 5 Incertidumbre | 6 Diferencia% | 7 Z-score | 8 Valoración |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| RL-MMT-JCTLM ¹ | 504.000 | N/A | N/A | N/A | 0,99 | N/A | Satisfactorio |
| Media de comparación internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Todos los participantes de QAP | 493,96 | 43,64 | 26 | 406,68 a 581,24 | 1,02 | 0,12 | Satisfactorio |
| Participantes QAP misma metodología | 506,52 | 30,06 | 27 | 446,4 a 566,63 | -1,48 | -0,25 | Satisfactorio |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

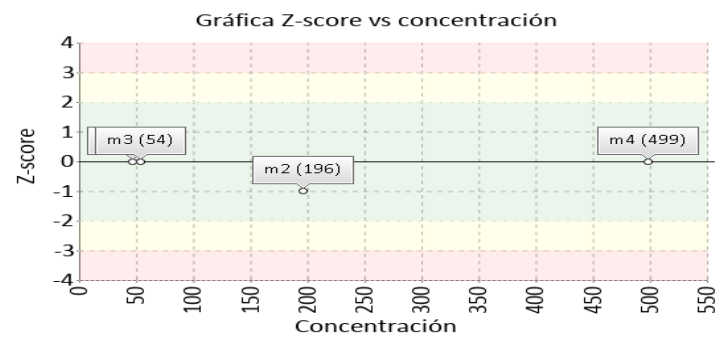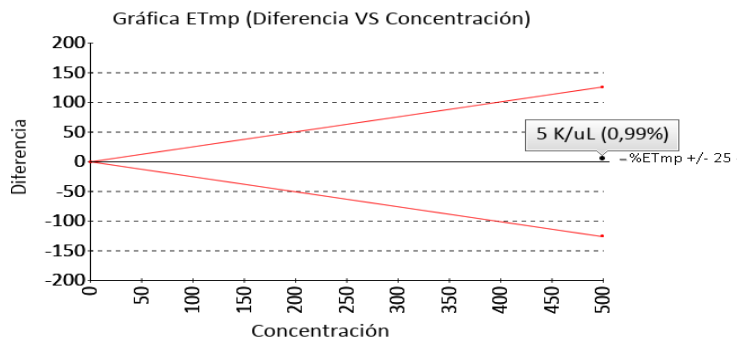

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Volumen corpuscular medio



88.5 fL

Sysmex XP-300 Electrical impedance

3% ETmp

| 1 Fuente de comparación | 2 V.A.V. | 3 D.E. | 4 n/N | 5 Incertidumbre | 6 Diferencia% | 7 Z-score | 8 Valoración |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| RL-MMT-JCTLM ¹ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Media de comparación internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Todos los participantes de QAP | 91,03 | 4,69 | 27 | 81,65 a 100,41 | -2,78 | -0,54 | Satisfactorio |
| Participantes QAP misma metodología | 91,09 | 4,03 | 19 | 83,04 a 99,15 | -2,85 | -0,64 | Satisfactorio |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

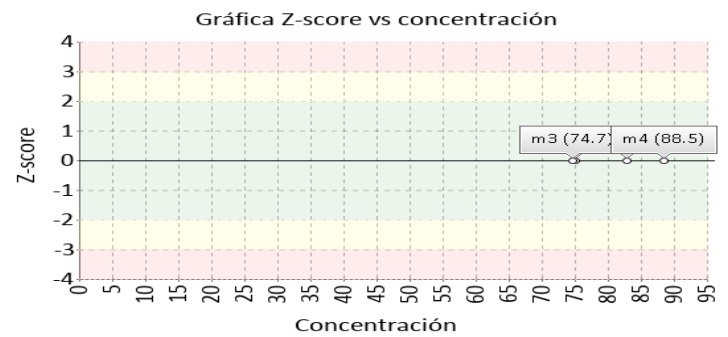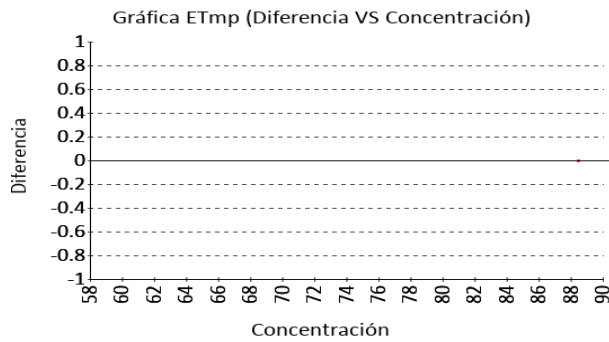

Volumen plaquetario medio



9.6 fL

Sysmex XP-300 Electrical impedance

3% ETmp

| 1 Fuente de comparación | 2 V.A.V. | 3 D.E. | 4 n/N | 5 Incertidumbre | 6 Diferencia% | 7 Z-score | 8 Valoración |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| RL-MMT-JCTLM ¹ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Media de comparación internacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Todos los participantes de QAP | 9,28 | 0,86 | 26 | 7,56 a 11 | 3,45 | 0,37 | Satisfactorio |
| Participantes QAP misma metodología | 9,61 | 0,75 | 18 | 8,1 a 11,11 | -0,06 | -0,01 | Satisfactorio |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

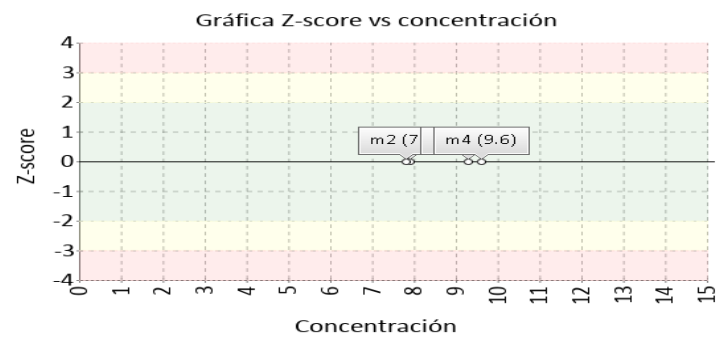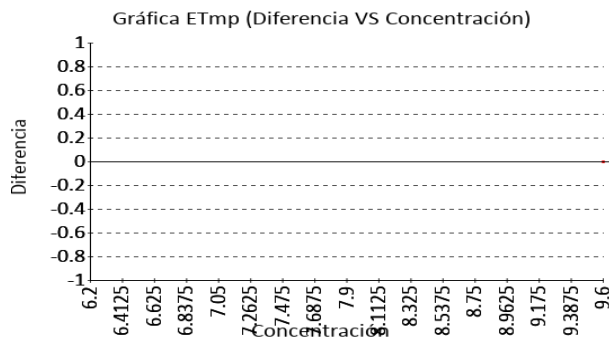

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100182 |
| Ronda: | 34 |
| Muestra: | 4 |
| Código Muestra: | PL0814 |
| Fecha reporte: | 2022-11-16 |
| Estado: | Evaluación original |

5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ítem | Mensurando | Analizador | Metodología declarada por el fabricante | Metodología de referencia avalada por el JCTLM | Material trazable declarado por el fabricante | Material de referencia avalado por el JCTLM | Estado de trazabilidad |
| 1 | Ancho de distribución del eritrocito | Sysmex XP-300 | Calculado | | No declarado | | No trazable |
| 2 | Concentración de hemoglobina corpuscular media | Sysmex XP-300 | Calculado | | No declarado | | No trazable |
| 3 | Hematocrito | Sysmex XP-300 | Calculado | | No declarado | | No trazable |
| 4 | Hemoglobina | Sysmex XP-300 | Photometric | 110 38 | No declarado | 130 | Trazable por metodología |
| 5 | Hemoglobina corpuscular media | Sysmex XP-300 | Calculado | | No declarado | | No trazable |
| 6 | Recuento de glóbulos blancos | Sysmex XP-300 | Electrical impedance | | No declarado | | No trazable |
| 7 | Recuento de glóbulos rojos | Sysmex XP-300 | Electrical impedance | 111 | No declarado | 131 | No trazable |
| 8 | Recuento de plaquetas | Sysmex XP-300 | Electrical impedance | 112 | No declarado | 132 | No trazable |
| 9 | Volumen corpuscular medio | Sysmex XP-300 | Electrical impedance | | No declarado | | No trazable |
| 10 | Volumen plaquetario medio | Sysmex XP-300 | Electrical impedance | | No declarado | | No trazable |

Nomenclatura método

110: Spectrophotometry **38:** Spectroscopy after reaction with KCN **111:** Flow cytometry, cell differentiation by impedance or light scattering, coincidence correction by dilution series JCTLM DB identifier C16RMP1 **112:** Flow cytometry cell differentiation by fluorescence detection of antibody stained platelets and light scattering coincidence correction by dilution series JCTLM DB identifier C3RMMP35

Nomenclatura materiales

130: Lyophilized fresh or frozen whole blood **131:** Fresh or stabilized whole blood **132:** Fresh whole blood

6. RESUMEN DE RONDA


| Ítem | Mensurando | Muestra 1 | | | Muestra 2 | | | Muestra 3 | | | Muestra 4 | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| | | DIF% con RL- MMT-JCTLM | Z-S WWR | Z Score participantes QAP | DIF% con RL- MMT-JCTLM | Z-S WWR | Z Score participantes QAP | DIF% con RL- MMT-JCTLM | Z-S WWR | Z Score participantes QAP | DIF% con RL- MMT-JCTLM | Z-S WWR | Z Score participantes QAP |
| 1 | Ancho de distribución del eritrocito | N/A | N/A | -0,71 | N/A | N/A | -0,52 | N/A | N/A | -0,55 | N/A | N/A | -1,28 |
| 2 | Concentración de hemoglobina corpuscular media | N/A | N/A | 1,01 | N/A | N/A | 0,38 | N/A | N/A | 0,04 | N/A | N/A | 0,43 |
| 3 | Hematocrito | N/A | N/A | 0,21 | N/A | N/A | -0,46 | N/A | N/A | 0,16 | N/A | N/A | -0,64 |
| 4 | Hemoglobina | 6,45 | N/A | 1,15 | -3,15 | N/A | -0,19 | 1,59 | N/A | 0,53 | 3,14 | N/A | -0,27 |
| 5 | Hemoglobina corpuscular media | N/A | N/A | 0,7 | N/A | N/A | 0,34 | N/A | N/A | -0,12 | N/A | N/A | 0,2 |
| 6 | Recuento de glóbulos blancos | N/A | N/A | -0,6 | N/A | N/A | 0,21 | N/A | N/A | 1,18 | N/A | N/A | -0,37 |
| 7 | Recuento de glóbulos rojos | N/A | N/A | 0,71 | N/A | N/A | -0,44 | N/A | N/A | 0,67 | 0 | N/A | -0,27 |
| 8 | Recuento de plaquetas | N/A | N/A | -0,53 | N/A | N/A | -1,53 | N/A | 0,45 | 0,46 | -0,99 | N/A | 0,12 |
| 9 | Volumen corpuscular medio | N/A | N/A | -0,29 | N/A | N/A | -0,4 | N/A | N/A | -0,31 | N/A | N/A | -0,54 |
| 10 | Volumen plaquetario medio | N/A | N/A | 0,57 | N/A | N/A | 0,39 | N/A | N/A | -0,56 | N/A | N/A | 0,37 |
| Notificaciones | | 10 0 0 | | | 10 0 0 | | | 10 0 0 | | | 10 0 0 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V.A.V - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible. | V.A.V. - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible. | Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score. | Alarma si su resultado está entre 2 y 3 Z-score. | No satisfactorio si su resultado es mayor a 3 Z-score. | N/A No aplica | <input type="checkbox"/> Tardío <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Revalorado |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100182 |
| Ronda: | 34 |
| Muestra: | 4 |
| Código Muestra: | PL0814 |
| Fecha reporte: | 2022-11-16 |
| Estado: | Evaluación original |

7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 4 MUESTRAS

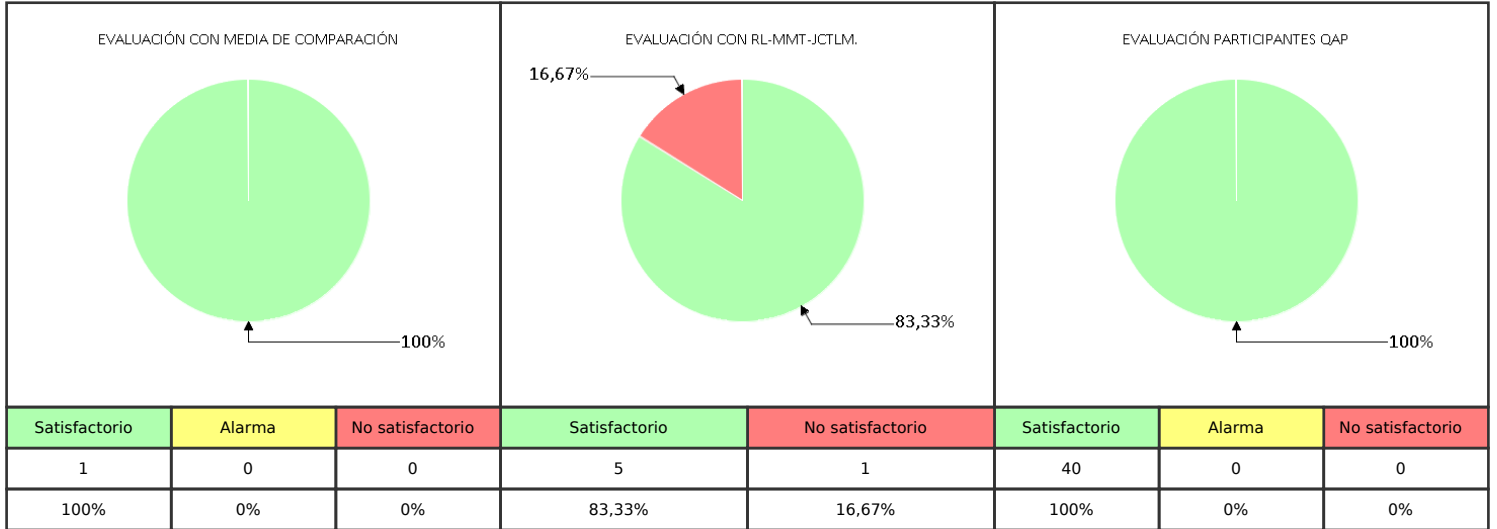

| | |
|----------------|---------------|
| Observaciones: | Revisado por: |
| | |
| | Fecha: |

-- Final de reporte --

**Aprobado por:
Aída Porras. Magister en Biología. Doctor in management.
Coordinadora programas QAP**